

簡易取扱説明書

Rxn-40 ラマン分光プローブ



本書は、簡易取扱説明書です。本書は、機器に関する取扱説明書の代替資料ではありません。

目次

1	本説明書について	5
1.1	免責事項.....	5
1.2	警告	5
1.3	シンボル.....	6
1.4	米国輸出管理規則の遵守	6
2	安全上の基本注意事項	7
2.1	作業員の要件.....	7
2.2	用途	7
2.3	労働安全.....	7
2.4	使用上の安全性.....	8
2.5	レーザーの安全性.....	8
2.6	圧力の安全性.....	9
2.7	サービスの安全性.....	9
2.8	重要安全事項.....	9
2.9	製品の安全性.....	10
3	製品説明	12
3.1	Rxn-40 プローブ	12
3.2	標準ハードウェア	15
3.3	データ収集ゾーン：ショートおよびロング	15
4	製品の受入検査および製品識別表示	16
4.1	受入検査.....	16
4.2	製品識別表示.....	16
4.3	納入範囲.....	17
5	プローブおよび光ファイバーの接続	18
5.1	EO ファイバーケーブル	18
5.2	FC ケーブルアセンブリ.....	19




6	設置	20
6.1	ステンレス製の内蔵ファイバー接続シェル付き Rxn-40 プローブ.....	20
6.2	直角ファイバーコネクタ (EO 方式) 付き Rxn-40 プローブ	21
6.3	プロセス接続用フランジ付き Rxn-40 プローブ	21
6.4	危険場所への設置.....	22
6.5	プロセスとプローブの適合性.....	23
7	設定	24
7.1	プローブの受入.....	24
7.2	プローブの校正と検証	24
8	操作	25
9	診断およびトラブルシューティング	26

1 本説明書について







1.1 免責事項

本書は、簡易取扱説明書です。本書は納入範囲に含まれる取扱説明書の代わりとなるものではありません。

1.2 警告

資料構成	意味
 危険 原因（/結果） 違反した場合の結果（該当する場合） ▶ 是正措置	危険な状況を警告するシンボルです。この状況を回避できなかった場合、重傷または致命傷を負う可能性があります。
 警告 原因（/結果） 違反した場合の結果（該当する場合） ▶ 是正措置	危険な状況を警告するシンボルです。この状況を回避できなかった場合、軽傷またはそれ以上の傷害を負う可能性があります。
 注意 原因/状況 違反した場合の結果（該当する場合） ▶ アクション/注記	器物を破損する可能性がある状況を警告するシンボルです。

1.3 シンボル

シンボル	説明
	レーザー放射シンボルは、Raman Rxn システムの使用時に危険な可視レーザー光に暴露する危険性をユーザーに警告するものです。
	高電圧シンボルは、人体に危害を与えるほどの高電位の存在を作業員に警告するものです。一部の産業では、特定のしきい値を超える高電圧を指します。高電圧のかかる機器や電線については、特別な安全要件と安全手順を満たす必要があります。
	CSA 認証マークは、本製品が適用される北米規格要件を試験し満足していることを示します。
	WEEE シンボルは、本製品を未分別の廃棄物として廃棄することが禁止されており、回収/再利用のために分別回収施設に送る必要があることを示します。
	CE マークは、欧州経済地域 (EEA) 内で販売される製品について、健康、安全、環境に関する保護基準に適合していることを示します。
	ATEX マークは、本製品が欧州およびその他の ATEX 認証機器の承認国で使用するための ATEX 指令の認証を取得していることを示します。

1.4 米国輸出管理規則の遵守

Endress+Hauser の方針では、米国商務省 [産業安全保障局](#) のウェブサイトですべての米国輸出管理法が厳格に遵守されます。Rxn-40 プローブの輸出規制品目分類番号は EAR99 です。

2 安全上の基本注意事項

2.1 作業員の要件

- 計測システムの設置、設定、操作、メンテナンスは、専門のトレーニングを受けた技術者のみが行うことができます。
- 作業を行う技術者はプラント管理者から特定作業の実施許可を受ける必要があります。
- 作業を行う技術者はこれらの取扱説明書を読んで理解し、その内容に従う必要があります。
- 測定点のエラー対応は、正式に認定された熟練技術者のみが実施できます。本書に記載されていない修理は、製造元において、またはサービス部門のみが実施できます。

レーザーの取扱いとその安全対策において適切な予防措置/設定/管理に関するさらなるサポートが必要な場合は、最新版の ANSI Z136.1 または IEC 60825-14 を参照してください。

2.2 用途

Rxn-40 ラマン分光プローブは、ラボやプロセスプラント環境における液体の浸漬サンプル分析用です。

推奨アプリケーションの例を以下に示します。

- **化学**：反応監視、混合、触媒反応監視、供給および最終製品監視
- **ポリマー**：重合反応監視、エクストルージョン監視、ポリマーブレンド
- **製薬**：原薬 (API) 反応監視、晶析、多型、混合
- **石油・ガス**：炭化水素分析

指定用途以外で本機器を使用した場合、作業員や計測システム全体の安全性を損なう危険性があり、あらゆる保証が無効になります。

2.3 労働安全

ユーザーは以下の安全条件を遵守する責任があります。

- 設置ガイドライン
- 電磁適合性に関する現地の規格/規制

電磁適合性に関して、本製品は工業用途に適用される国際規格に従って試験されています。提示される電磁適合性は、アナライザに適切に接続された製品に対してのみ適用されます。

2.4 使用上の安全性

全測定点の設定を実施する前に：

- すべての接続が正しいことを確認してください。
- 電気光学ケーブルが損傷していないことを確認してください。
- プローブの浸漬に十分な液位を確保してください（該当する場合）。
- 破損した製品は使用せず、不意の作動を防いでください。
- 損傷のある製品にはその旨を明記したラベルを掲示してください。

使用中：

- 不具合を修正できない場合は、製品の使用を停止し、意図しない作動から保護してください。
- レーザー機器の使用においては、個人用保護具の着用や、機器アクセスを認定ユーザーに限定するなど、現地のレーザーに関する全ての安全規約に必ず従ってください。

2.5 レーザーの安全性

Raman Rxn アナライザは、以下に定義されるクラス 3B レーザーを使用します。

- 米国規格協会 (ANSI) Z136.1、レーザーの安全な使用に関する米国標準規格
- 国際電気標準会議 (IEC) 60825-1、レーザー製品の安全性 - 第 1 部

危険

レーザー放射

- ▶ ビームに暴露しないようにしてください
- ▶ クラス 3B レーザー製品

警告


レーザー光は、揮発性有機化合物などの特定の物質の発火を引き起こす可能性があります。

発火を引き起こす可能性のある 2 つの原因として、発火点までのサンプルの直接加熱とサンプルの発火に結び付く汚染要因物質（粉塵など）の臨界点までの過熱があります。

放射光はほぼ不可視であるため、レーザーの設定には安全性に対するさらなる配慮が必要です。レーザーの初期方向と考えられる散乱経路に常に注意してください。

励起波長が 532 nm および 785 nm の場合は、OD3 以上のレーザー保護メガネを着用してください。

励起波長が 993 nm の場合は、OD4 以上のレーザー保護メガネを着用してください。

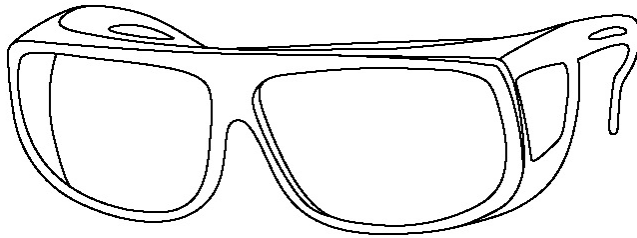

A004B421

図 1. レーザー保護メガネ

レーザーの取扱いとその安全対策において適切な予防措置/設定/管理に関するさらなるサポートが必要な場合は、最新版の ANSI Z136.1 または IEC 60825-14 を参照してください。

2.6 圧力の安全性

定格圧力はプローブの参照規格に基づいています。フィッティングとフランジは、プローブ構成に応じて定格に含まれる場合と含まれない場合があります。さらに、製品の定格はボルトやシールの材質やその手順の影響を受ける場合があります。

ユーザーの配管またはサンプルシステムへの Endress+Hauser 製プローブの設置を計画する場合、定格の制限を理解し、適切なフィッティング、ボルト、シールを選択して、封止する接合部の調整や組立てについて適切な手順を選定することはユーザーの責任となります。

封止する接合部に対してこれらの定格の制限を遵守しない、またはボルトとシールに関して一般に認められている慣例に従わない場合、それはユーザーの責任となります。

2.7 サービスの安全性

サービスのためにプロセスプローブをプロセスインタフェースから取り外す場合は、使用者が定めた安全指示事項に従ってください。機器のサービスを実施する場合は、必ず適切な保護具を着用してください。

2.8 重要安全事項

- Rxn-40 プローブを指定用途以外には使用しないでください。
- レーザー光を直視しないでください。
- レーザーを鏡面/光沢面または乱反射が起こる可能性のある表面に向けないでください。反射ビームは直接ビームと同様に有害です。
- 取付けられて使用していないプローブを、キャップをしない、あるいは塞がない状態で放置しないでください。
- 常にレーザー光ブロックを使用して、不注意によるレーザー放射の散乱を防止してください。

2.9 製品の安全性

本製品は、現行のすべての安全要件を満たすように設計されており、適切な試験を実施し、安全な動作状態で工場から出荷されます。関連法規および国際規格に準拠します。アナライザに接続する機器も、該当するアナライザの安全基準に適合する必要があります。

Endress+Hauser ラマン分光システムは、以下の安全機能を搭載しており、米国政府の要求事項 21 連邦規則集 (21 CFR) 第 1 章、J 節 (管理/運営機関：医療機器・放射線保健センター (CDRH)) および IEC 60825-1 (管理/運営機関：国際電気標準会議) に準拠しています。

2.9.1 CDRH および IEC 準拠

Endress+Hauser ラマン分光計は、CDRH および IEC 60825-1 の設計/製造要件を満たすことを Endress+Hauser は保証します。

Endress+Hauser ラマン分光計は CDRH に登録されています。既存の Raman Rxn アナライザまたはアクセサリを許可なく変更した場合、危険なレーザー光線暴露が起こる可能性があります。このような変更により、システムは Endress+Hauser が認証済みの連邦要件に適合しなくなる可能性があります。

2.9.2 レーザー放射インターロック

- ▶ Rxn-40 プローブを取り付けると、インターロック回路の一部として機能します。ファイバークーブルが切断された場合、レーザーは切断後数ミリ秒以内にオフになります。

注意


ケーブルが適切に敷設されていないと、永続的な損傷が生じる可能性があります。

- ▶ プローブとケーブルは慎重に取り扱い、ねじれないように注意してください。
- ▶ ファイバークーブルは、ラマン光ファイバークーブル技術仕様書 (TI01641C) に従い、最小曲げ半径を遵守して取り付けてください。

インターロック回路は低電流ループです。Rxn-40 プローブを危険場所で使用する場合、インターロック回路を本質安全 (IS) バリアに通す必要があります。


LED レーザーインジケータの位置は、アセンブリのタイプに応じて異なります。

- ステンレス製の内蔵ファイバー接続シェルオプション：インジケータはファイバー接続シェル上にあります。レーザーが励起状態の可能性がある場合、インジケータが点灯します。
- 取り外し不可能な直角ファイバーコネクタアセンブリ (EO 方式)：インジケータはアセンブリ上にあります。レーザーが励起状態の可能性がある場合、インジケータが点灯します。

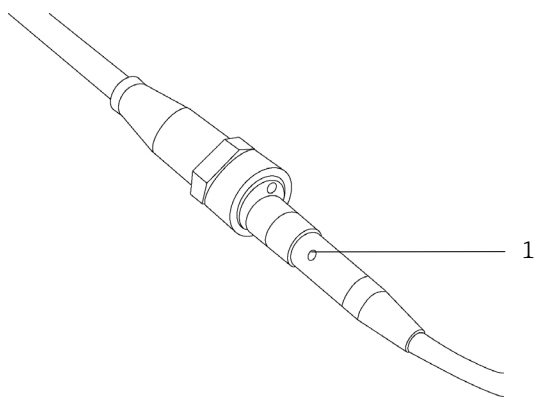

A0049116

図 2. ステンレス製の内蔵ファイバー接続シェル上にあるレーザー放射インジケータ (1)

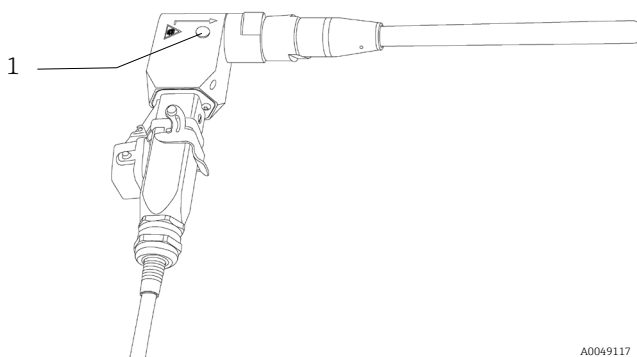

A0049117

図 3. 直角ファイバーコネクタ (EO 方式) アセンブリ上にあるレーザー放射インジケータ (1)

3 製品説明

3.1 Rxn-40 プローブ

Kaiser ラマンテクノロジーを搭載した Rxn-40 ラマン分光プローブは、ラボやプロセスプラント環境における液体の浸漬サンプル分析用です。本プローブはインラインのリアルタイム化学測定が可能であり、レーザー波長 532 nm、785 nm、993 nm で動作する Endress+Hauser Raman Rxn アナライザに適合します。

Rxn-40 プローブは非常にコンパクトで、複数の取付オプションが提供されています。Rxn-40 プローブのプロセス接続は、スウェージ接続、圧縮取付け、フランジ取付け、またはフローセルへの取付けに対応しており、NeSSI に適合しています。本プローブでは、プロセスをカスタマイズしやすくしてサンプリングの柔軟性を高めるために、以下の構成からお選びいただけます。

- Rxn-40 プローブ、非フランジ/フランジ構成
- Rxn-40 プローブ、ミニ構成

3.1.1 Rxn-40 プローブ、非フランジ構成

非フランジ構成の Rxn-40 プローブの標準の浸漬可能範囲は、152、305、457 mm (6、12、18 in) です。


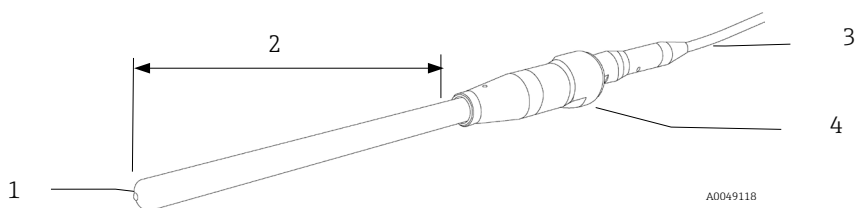


図 4. 非フランジ構成の Rxn-40 プローブ

#	説明
1	先端
2	浸漬部
3	ファイバークーブル
4	オプティック本体

3.1.2 Rxn-40 プローブ、フランジ構成

フランジ構成の Rxn-40 プローブでは、ご希望に応じて ASME B16.5 および DIN EN1092 タイプ B 準拠フランジを使用できます。

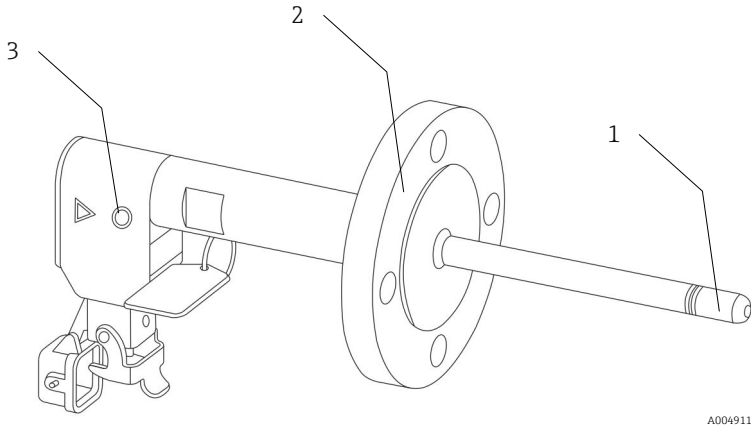


A0049119

図 5. フランジ構成の Rxn-40 プローブ

#	名称	説明
1	先端	SUS 316L 相当、C276 アロイまたはグレード 2 チタン 浸漬可能な長さ：36 mm (1.42 in)
2	フランジ	プロセス接続用フランジ (例：SUS 316L 相当、C276、 グレード 2 チタン)
3	LED レーザー インジケータ	レーザーが励起状態の場合に点灯します。

3.1.3 Rxn-40 プローブ、ミニ構成

ミニ構成の Rxn-40 プローブの浸漬可能な長さは 36.07 mm (1.42 in) です。

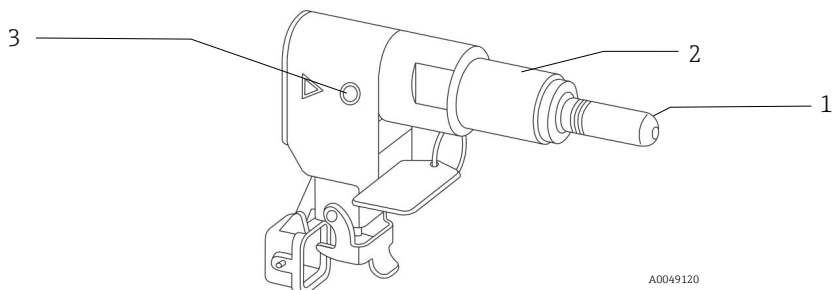

A0049120

図 6. ミニ構成の Rxn-40 プローブ

#	名称	説明
1	先端	SUS 316L 相当、C276 アロイまたはグレード 2 チタン 浸漬可能な長さ : 36.07 mm (1.42 in)
2	オプティック本体	材質はプローブ先端と同じですが、プロセス流体に浸漬されません。
3	LED レーザー インジケータ	レーザーが励起状態の場合に点灯します。

3.2 標準ハードウェア

標準ハードウェアには Rxn-40 プローブが含まれます（ファイバーケーブルは含まれません）。ファイバーケーブルは別売です。

すべての新規設置には、以下のいずれかのアクセサリが必要です。使用中のアナライザに適したコネクタをお選びください。

- 取り外し不可能な直角ファイバーコネクタアセンブリ（EO 方式）：このアセンブリには、励起用または収集用ファイバー、レーザー安全インターロックコネクタおよび LED インターロックインジケータが含まれます。
- ステンレス製の内蔵ファイバー接続シェル：このシェルには、励起用または収集用ファイバー、レーザー安全インターロックコネクタおよび LED インターロックインジケータが含まれます。

3.3 データ収集ゾーン：ショートおよびロング

Rxn-40 プローブには、選択したバージョンに応じて、ショート（S）またはロング（L）のデータ収集ゾーンがあります。

- ショートのデータ収集ゾーンは、一般的にゲル、スラリー、塗料などの不透明なサンプルに使用されます。
- ロングのデータ収集ゾーンは、炭化水素や溶媒などの透明なサンプルに適しています。

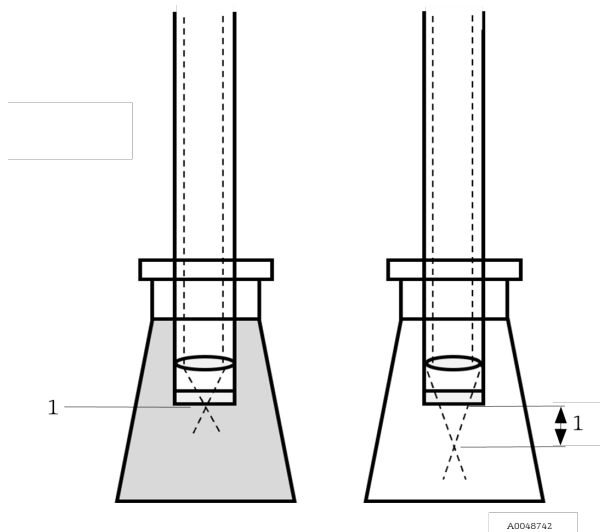


図 7. ショート（左）とロング（右）のデータ収集ゾーン（1）

4 製品の受入検査および製品識別表示

4.1 受入検査

1. 梱包が破損していないことを確認してください。梱包が破損している場合は、サプライヤに通知してください。問題が解決されるまで破損した梱包を保管してください。
2. 内容物が破損していないことを確認してください。納品物が破損している場合は、サプライヤに通知してください。問題が解決されるまで破損した製品を保管してください。
3. すべての納入品目が揃っており、欠品がないことを確認してください。発送書類と注文内容を比較してください。
4. 保管および輸送用に、衝撃や湿気から確実に保護できるように製品を梱包してください。納入時の梱包材を使用すると、最適な保護効果が得られます。許容周囲条件を必ず遵守してください。

ご不明な点がありましたら、弊社販売窓口にお問い合わせください。

注意

- ▶ 梱包が不適切な場合、輸送中にプローブが損傷する可能性があります。

4.2 製品識別表示

4.2.1 ラベル

プローブには、以下の情報を示すラベルが貼付されています。

- Endress+Hauser ブランド
- 製品識別表示（例：Rxn-40）
- シリアル番号

タグは貼付されており（取り外し不可）、以下のような情報が記載されています。

- 拡張オーダーコード
- 製造者データ
- プローブの主要な機能特性（例：材質、波長、焦点深度）
- 安全上の警告と認証情報（該当する場合）

プローブ/タグの情報とご注文内容を照合してください。

4.2.2 製造者所在地

Endress+Hauser
371 Parkland Plaza
Ann Arbor, MI 48103 USA

4.3 納入範囲

以下に納入範囲を示します。

- ご注文の構成の Rxn-40 プローブ
- *Rxn-40* ラマン分光プローブ取扱説明書
- Rxn-40 プローブ製品性能証明書
- 各国の適合宣言（該当する場合）
- 危険場所で使用するための証明書（該当する場合）
- 材料証明書（該当する場合）
- Rxn-40 プローブのオプションアクセサリ（該当する場合）

ご不明な点がございましたら、最寄りの弊社販売窓口までお問い合わせください。

5 プローブおよび光ファイバーの接続

Rxn-40 プローブは、以下のいずれかを使用して Raman Rxn アナライザに接続します。

- ファイバーチャンネル (FC) ケーブルアセンブリ : 5 メートル (16.4 ft) 単位で最大 50 メートル (164.0 ft) まで使用可能 (アプリケーションによる長さ制限あり)
- 電気光学 (EO) ファイバーケーブル : 5 メートル (16.4 ft) 単位で最大 200 メートル (656.2 ft) まで使用可能 (アプリケーションによる長さ制限あり)

また、オプションで EO オス - メス延長ファイバーケーブルを 5 メートル (16.4 ft) 単位で最大 200 メートル (656.2 ft) まで使用できます (アプリケーションによる長さ制限あり)。

アナライザ接続の詳細については、該当する Raman Rxn アナライザの取扱説明書を参照してください。

注意

プローブを FC ケーブルアセンブリまたは EO ファイバーケーブルに接続する作業については、資格のある Endress+Hauser のエンジニアまたは専門のトレーニングを受けた技術者が行う必要があります。


有資格者によるトレーニングを受けていないユーザーがプローブを光ファイバーケーブルに接続しようとした場合、損傷が発生し、保証が無効になる可能性があります。

- ▶ プローブとファイバーケーブルの接続に関する追加のサポートについては、最寄りの Endress+Hauser サービス担当者にお問い合わせください。

5.1 EO ファイバーケーブル

EO ファイバーケーブルは、励起用/収集用ファイバーおよび電氣的レーザーインターロックを含む、堅牢なシングルコネクタを使用して、Rxn-40 プローブをアナライザに接続します。

ケーブル経路が長い場合やコンジットに敷設する場合には、EO 延長ケーブルを使用できます。

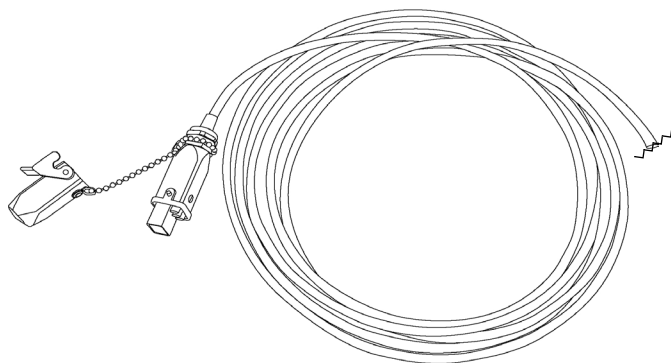


A0048938

図 8. アナライザ用コネクタを備えた EO ファイバーケーブル

5.2 FC ケーブルアセンブリ

FC ケーブルアセンブリは、以下を使用して Rxn-40 プローブをアナライザに接続します。

- 電氣的インターロックコネクタ
- 黄色 (YE) の励起用ファイバー (レーザー出力用)
- 赤色 (RD) の収集用ファイバー (分光器入力用)

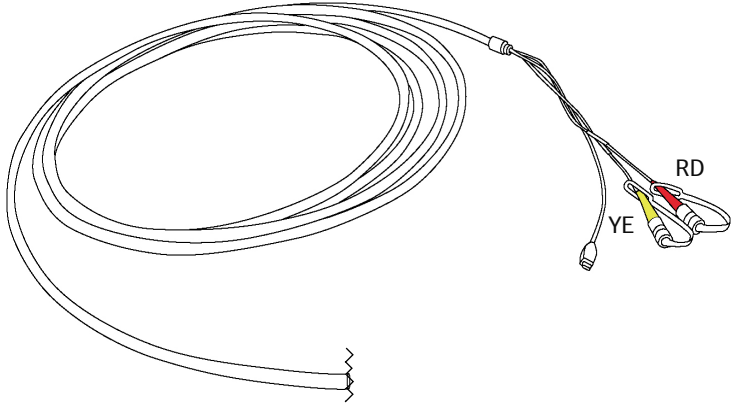

A0048939

図 9. アナライザ用コネクタを備えた FC ケーブルアセンブリ

6 設置

プロセスに設置する前に、最大レーザー出力が危険場所用機器の評価書類（4002266）またはこれと同等の資料に記載される規定量を下回っていることを確認してください。サポートが必要な場合は、サービス担当者にお問い合わせください。

クラス 3B レーザー製品に対する目と皮膚の標準的な安全対策（EN 60825/IEC 60825-14 または ANSI Z136.1 準拠）に従ってください。また、以下も遵守してください。

<p>▲ 危険</p>	<p>プローブは特定の密封境界を考慮して設計されています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ プローブの圧力仕様は、対象となるシール機能（シャフト、フランジなど）でシールが実現されている場合にのみ有効です。 ▶ 使用定格には、フィッティング、フランジ、ボルト、シールの制限が含まれる場合があります。設置者はこれらの制限を理解し、適切な金具類と組立手順を使用して、耐圧性に優れた安全な接合部を形成する必要があります。 <p>レーザー製品に対する標準的な予防措置を実施してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ プローブがサンプルチャンバ内に設置されていない場合は、必ずキャップをして、人に向けず、拡散ターゲットに向けておく必要があります。
<p>▲ 警告</p>	<p>未使用のプローブに迷光が入射すると、使用中のプローブから収集されるデータが干渉を受け、校正エラーや測定誤差が発生する可能性があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 迷光がプローブに入るのを防止するために、未使用のプローブには必ずキャップをしてください。
<p>注意</p>	<p>コネクタ内のケーブルが過度にねじれると、ファイバー接続が切断され、Rxn-40 プローブが動作しなくなる可能性があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ サンプルフローまたはサンプル対象領域を測定できるようにプローブを慎重に取り付けてください。

6.1 ステンレス製の内蔵ファイバー接続シェル付き Rxn-40 プローブ

ステンレス製の内蔵ファイバー接続シェル付き Rxn-40 プローブをサンプルインタフェースに取り付けるときには、ケーブルの過度のねじれを防止する必要があります。ケーブルが過度にねじれると、ファイバー接続が切断され、Rxn-40 プローブが動作しなくなる可能性があります。プローブの一般的な取付オプションの一部を以下に示します。

6.1.1 プローブとインタフェースの接続

内蔵ファイバー接続シェル付き Rxn-40 プローブに対して、NPT（ネジ接続）インタフェースを現場で取り付ける場合は、プローブ本体とファイバーケーブルを固定してから、インタフェースを回転させてプローブに接続します。しっかりと固定できたら、インタフェースと接続したプローブをサンプルエリアに統合します。

6.1.2 プローブを既設インタフェースに接続

プローブ用の NPT インタフェースがすでに取り付けられている場合は、プローブを回転させてインタフェースに接続してから、ファイバーケーブルのステンレス製シェルをプローブに接続します。しっかりと固定できたら、ファイバーケーブルハウジングをプローブに取り付けます。

6.1.3 プローブおよび圧縮ナットインタフェース

オプションのコンプレッションフィッティング（スウェージナットなど）を使用してプローブを取り付ける場合は、プローブをインタフェースに取り付ける前に、ファイバーケーブルをプローブ本体に接続することができます。コンプレッションフィッティングでは、取付時にプローブを回転させる手間が軽減されます。

6.2 直角ファイバーコネクタ（EO 方式）付き Rxn-40 プローブ

取り外し不可能な直角ファイバーコネクタ（EO 方式）アセンブリを備えた Rxn-40 プローブを取り付ける場合は、取付時に光ファイバーケーブルアセンブリをプローブから取り外すことをお勧めします。

6.3 プロセス接続用フランジ付き Rxn-40 プローブ


Rxn-40 プローブは、プロセス配管への接続にさまざまな標準フランジを使用して取り付けることができます。取付時には、適切な方法や手順に従い、取付けと使用に関する定格に適したボルトやシールを慎重に選択する必要があります。

6.4 危険場所への設置

プローブは、スリップストリーム、ドレインバルブ、リアクタ、循環ループ、ブレンダーヘッダー、流入口または流出口の配管に直接設置できるように設計されています。プローブは、危険場所取付図 (4002396) に準拠して設置してください。

注意

プローブヘッドを現場で設置するときには、設置場所でファイバーケーブルに張力がかからないように配慮し、ファイバーケーブル仕様で定められた曲げ半径を遵守してください。

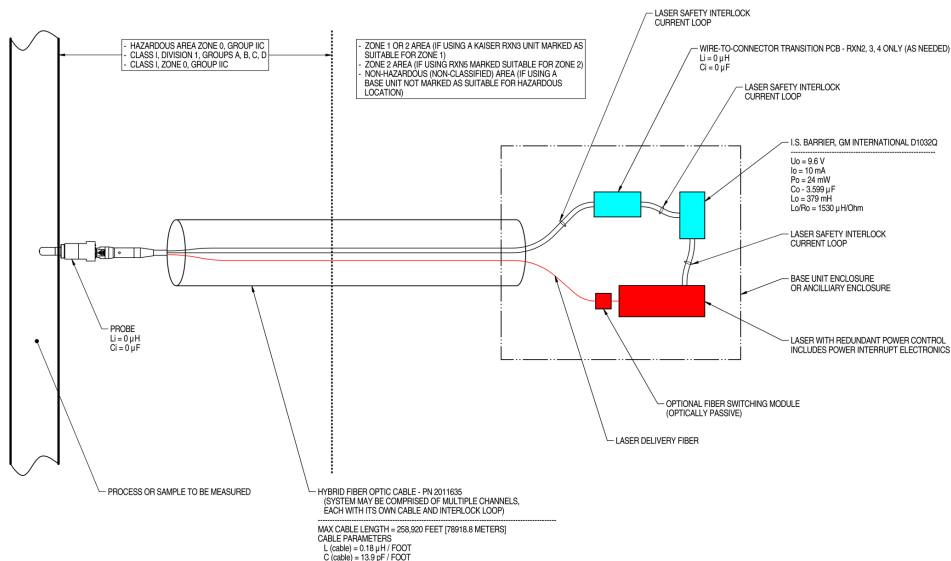

NOTES:

- CONTROL EQUIPMENT CONNECTED TO THE ASSOCIATED APPARATUS MUST NOT USE OR GENERATE MORE THAN 250 VRMS OR VDC.
- INSTALLATION IN THE U.S. SHOULD BE IN ACCORDANCE WITH ANSI/ISA RP12.6 "INSTALLATION OF INTRINSICALLY SAFE SYSTEMS FOR HAZARDOUS (CLASSIFIED) LOCATIONS" AND THE NATIONAL ELECTRICAL CODE® (ANSI/NFPA 70) SECTIONS 504 AND 505.
- INSTALLATION IN CANADA SHOULD BE IN ACCORDANCE WITH THE CANADIAN ELECTRICAL CODE, CSA C22.1, PART 18, APPENDIX J18.
- ASSOCIATED APPARATUS MANUFACTURER'S INSTALLATION DRAWING MUST BE FOLLOWED WHEN INSTALLING THIS EQUIPMENT.
- FOR U.S. INSTALLATIONS, THE PROBE MODELS RXN-30 (AIRHEAD), RXN-40 (WETHEAD) AND RXN-41 (PILOT) ARE APPROVED FOR CLASS I, ZONE 0 APPLICATIONS.
- NO REVISION TO DRAWING WITHOUT PRIOR CSA APPROVAL.
- WARNING: SUBSTITUTION OF COMPONENTS MAY IMPAIR INTRINSIC SAFETY.

A0049010

図 10. 危険場所取付図 (4002396 バージョン X6)

6.5 プロセスとプローブの適合性

設置する前に、プローブの定格圧力と温度定格、およびプローブの材質が、挿入するプロセスに適合していることを確認してください。

プローブは、地域の建築・建設関連の基準に従い、容器または配管に適した標準的なシール技術（例：フランジ、コンプレッションフィッティング）を使用して設置する必要があります。

危険

プローブを高温または高圧プロセスに設置する場合は、機器の損傷や安全上の危険を回避するために、追加の安全対策を講じる必要があります。

地域の安全基準を満たしたブローアウト防止機器の使用が強く推奨されます。

- ▶ ユーザーの責任において、ブローアウト防止機器が必要かどうかを判断し、必要な場合は設置時にプローブに確実に取り付けてください。

危険

チタン製プローブを設置する場合、衝撃や過度のプロセス摩擦によりスパークの発生や発火の可能性があるため、注意してください。

- ▶ このような問題を回避するために、チタン製プローブを設置して使用する場合は予防措置を講じる必要があります。

7 設定

Rxn-40 プローブは、Raman Rxn アナライザに接続可能な状態で納入されます。プローブに対する追加調整は不要です。プローブを使用するために設定する場合は、以下の説明に従ってください。

注意

プローブの設置と使用に関するパラメータには、関連アプリケーションによって管理される特定の要件がある場合があります。

- ▶ これらの特定の要件については、ATEX、CSA、IECEX、JPEX、UKCA の適切な証明書を参照してください。

7.1 プローブの受入

受入検査 →  の説明に従って、製品の受入検査手順を実行してください。

さらに、受入後、プロセスに設置する前に輸送用の容器カバーを取り外し、サファイア製の窓の損傷の有無を確認してください。窓に傷や亀裂があることが目視で確認された場合は、納入業者にご連絡ください。

7.2 プローブの校正と検証

プローブとアナライザは、使用前に校正する必要があります。内部機器校正の詳細については、該当する Raman Rxn2 または Raman Rxn4 アナライザの取扱説明書を参照してください。

測定値の収集前やオプティックの交換後には強度校正を実施する必要があります。校正用アクセサリ (HCA) と適切なオプティックアダプタを使用して、プローブ校正を実施してください。すべてのアクセサリ情報と校正手順については、ラマン校正用アクセサリ取扱説明書 (BA02173C) を参照してください。

内部システム校正に合格しない限り、Raman RunTime ソフトウェアはスペクトルを収集できません。

ラマンシフト標準物質を使用した校正結果の検証が強く推奨されますが、必須ではありません。ラマンシフト標準物質を使用した検証手順については、校正用アクセサリの取扱説明書も参照してください。

推奨される校正および適格性評価のシーケンスは、以下の通りです。

1. 分光器およびレーザー波長の内部アナライザ校正
2. 適切な校正用アクセサリを使用したシステム強度校正
3. 適切な標準物質を使用したシステム機能検証

プローブ、オプティック、サンプルシステムに関する具体的なご質問については、お客様の営業担当者にお問い合わせください。

8 操作

Endress+Hauser Raman Rxn-40 プローブは、ラボやプロセスプラント環境における液相サンプルの**その場**でのラマン分光測定用のコンパクトな密閉型浸漬プローブです。

Rxn-40 シリーズのプローブは、レーザー波長 532 nm、785 nm、または 993 nm で動作するレーザーを搭載した Endress+Hauser Raman Rxn アナライザに適合します。

使用方法に関する追加情報については、該当する Raman Rxn アナライザの取扱説明書を参照してください。

Raman Rxn アナライザの取扱説明書は、Endress+Hauser ウェブサイト (<https://endress.com/downloads>) のダウンロードエリアから入手できます。

9 診断およびトラブルシューティング

Rxn-40 プローブに関する問題のトラブルシューティングを行う場合は、下表を参照してください。プローブが損傷している場合は、評価を行う前にプローブをプロセスストリームから切り離してレーザーをオフにしてください。サポートが必要な場合は、サービス担当者にお問い合わせください。

故障状態	考えられる原因	措置
1 信号または信号対雑音 (S/N) 比の大幅な低下	窓の汚れ	<ol style="list-style-type: none"> 1. プロセスからプローブを慎重に取り外し、汚染を除去してプローブ先端の光学窓を検査します。 2. 必要に応じて、窓を清掃してから元の環境に戻します。 <p>*Rxn-40 取扱説明書 (BA02181C) の「メンテナンス」セクションを参照</p>
	ファイバーに亀裂が入っているが断線はしていない	ファイバーの状態を確認し、交換が必要な場合はサービス担当者にお問い合わせください。
2 レーザーの電源が投入され、LED レーザーインジケータが点灯しているにもかかわらず信号が完全に消失する	ファイバーの破損 (インターロックワイヤは破損していない)	すべてのファイバー接続が確実に行われていることを確認します。
	プロセス材料がプローブ窓に固着している	プローブを取り外して窓を清掃します。
3 プローブの LED レーザーインジケータが点灯しない	ファイバーアセンブリの損傷または Rxn-40 プローブのインターロックの損傷	<ol style="list-style-type: none"> 1. ファイバーに破損の形跡があるかどうかを確認します。 2. プローブがファイバーに正しく接続されていることを確認します。 3. 交換が必要な場合はサービス担当者にお問い合わせください。
	ファイバーケーブルの EO コネクタが固定/ラッチされていない	EO コネクタがプローブ (該当する場合) とアナライザに正しく接続され、ラッチされていることを確認します。
	リモートインターロックコネクタが外れている	アナライザの背面 (ファイバー EO コネクタの横) にあるツイストロック式リモートインターロックコネクタが接続されていることを確認します。

故障状態	考えられる原因	措置
4 信号が不安定であり、窓の裏側に汚染が確認される	窓のシール不良	<ol style="list-style-type: none"> 1. プローブを取り外し、窓の内側部分について水分や結露の有無を調べます。 2. 窓の内側部分について水分や結露の有無を調べます。 3. スペクトル偏差の兆候の有無を確認します。 上記のいずれかに該当する場合は、サービス担当者にご連絡の上、プローブを弊社に返却してください。
5 レーザー出力または収集効率の低下	ファイバーケーブルとプローブの間のファイバー接続部の汚染（埃の粒子、粉塵粒子、その他）	プローブのファイバー終端部を丁寧に清掃します。 清掃方法および新しいプローブの始動手順については、該当する Raman Rxn アナライザの取扱説明書を参照してください。
6 アナライザのレーザーインターロックによりレーザーが停止する	レーザーインターロックの作動	接続されている光ファイバーケーブルのすべてのチャンネルでファイバー破損の有無を確認し、リモートインターロックコネクタが各チャンネルに適切に配置されていることを確認します。
7 スペクトルの帯域やパターンが認識されない	ファイバーに亀裂が入っているが断線はしていない プローブ先端の汚染 漏れによるプローブの内部光学系の汚染	考えられる原因を確認し、損傷した製品の返却が必要な場合はサービス担当者にお問い合わせください。
8 その他の説明できないプローブの望ましくない動作	プローブの物理的な損傷	損傷した製品の返却が必要な場合はサービス担当者にお問い合わせください。

www.addresses.endress.com

Endress+Hauser 
People for Process Automation