

# Información técnica

## Memosens CPS77E

Sensor ISFET para medición de pH

### Digital con tecnología Memosens 2.0



#### Aplicación

- Aplicaciones sanitarias y estériles
- Industrias alimentaria y farmacéutica
- Biotecnología

Con las homologaciones siguientes para el uso en áreas de peligro de Zona 0, Zona 1 y Zona 2: ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, JPN Ex, INMETRO, UKCA y Korea Ex.

#### Ventajas

- Resistencia antirroturas
- Biocompatibilidad probada con éxito en relación con la reactividad biológica in vitro (citotoxicidad) e in vivo según USP <87> y USP <88> Cl. VI (121 °C (250 °F))
- Esterilizable y en autoclave
- Intervalos de calibración más largos que los que requieren los electrodos de vidrio de pH
  - Histéresis más corta en caso de cambio de temperatura
  - Errores de medición más pequeños tras la exposición a temperaturas elevadas
  - Prácticamente no hay errores ácidos ni alcalinos
- Sensor de temperatura Pt1000 integrado para compensación de temperatura efectiva

#### Otras ventajas que proporciona la tecnología Memosens

- Seguridad máxima del proceso gracias a la transmisión de señal inductiva, sin contacto
- Seguridad de datos gracias a la transmisión de datos digital
- Muy fácil de usar porque los datos del sensor se guardan en el mismo sensor
- El mantenimiento predictivo se puede llevar a cabo registrando en el sensor los datos de carga de este


## Funcionamiento y diseño del sistema

### Principio de medición

En la década de los 70, como alternativa a los electrodos de vidrio para la medición de pH, se desarrollaron transistores de efecto de campo selectivos de iones o, en términos más generales, sensibles a iones.


#### Medición de pH con sensores ISFET

Los transistores de efecto de campo selectivos de iones están basados en la disposición de un transistor MOS<sup>1)</sup> → 1, 2, pero sin la puerta metálica (elemento 1) como electrodo de control. En su lugar, en el sensor ISFET el producto (elemento 3) → 2, 2 está en contacto directo con la capa aislante de la puerta (elemento 2). En el sustrato conductor de tipo n (elemento 5) del semiconductor (Si) se extienden dos regiones de alta conductividad de tipo p. Actúan como un electrodo suministrador de carga ("Source" [fuente], S) y un electrodo receptor de carga ("Drain" [drenaje], D). El electrodo de puerta de metal (en el caso de MOSFET) y el producto (en el caso de ISFET) forma un condensador con el sustrato subyacente. La diferencia en la potencia (tensión) entre la puerta y el sustrato ( $U_{GS}$ ) aumenta la densidad de electrones en la zona entre el "Source" (fuente) y el "Drain" (drenaje). Se forma un canal conductivo → 2, 2 (elemento 4), de manera que circula una corriente  $I_D$  cuando se aplica una tensión  $U_D$ .

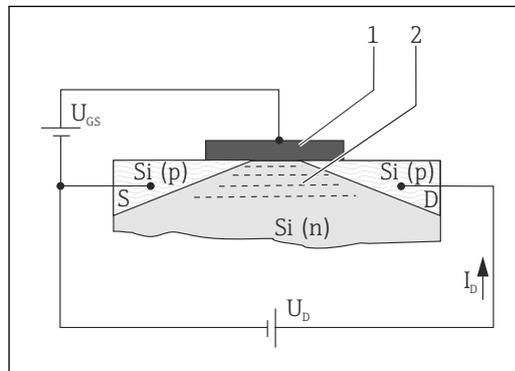

1 Principio MOSFET

- 1 Puerta de metal
- 2 Canal conductivo (conductor de N)

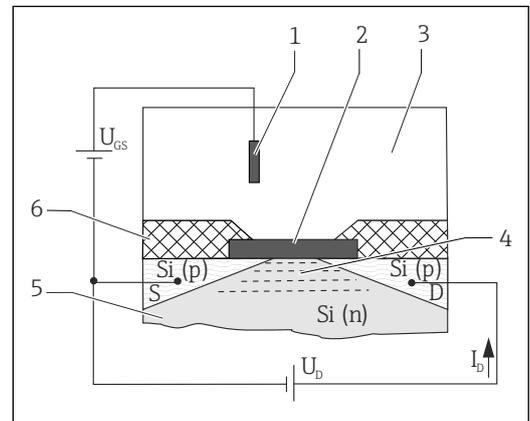

2 Principio ISFET

- 1 Electrodo de referencia
- 2 Capa aisladora de puerta
- 3 Producto
- 4 Canal conductivo (conductor de N)
- 5 Sustrato de polisilicio de dopaje tipo N
- 6 Eje del sensor

Con el ISFET, los iones del producto y situados en la capa límite entre el producto y el aislador de puerta generan el campo eléctrico (potencia de puerta). El efecto descrito anteriormente hace que se cree un canal conductivo en el sustrato semiconductor de polisilicio entre el "Source" (fuente) y el "Drain" (drenaje), y hace que la corriente fluya entre estos.

Los circuitos del sensor adecuados utilizan la dependencia de la potencia de puerta selectiva de iones para generar una señal de salida proporcional a la concentración del tipo de ion.

#### ISFET selectivo de pH

El aislador de puerta actúa como una capa selectiva de iones para iones  $H^+$ . Mientras que el aislador de puerta también es impermeable a estos iones (efecto aislador), permite reacciones de superficie reversibles con iones  $H^+$ . Dependiendo del carácter ácido o alcalino del producto, los grupos funcionales de la superficie del aislador o reciben o dan iones  $H^+$  (comportamiento anfótero de grupos funcionales). Los resultados de la carga positiva en la superficie del aislador (iones  $H^+$  recibidos en el producto ácido) o carga negativa en la superficie del aislador (iones  $H^+$  dados en el producto alcalino). Dependiendo del valor de pH, se puede utilizar una carga de superficie definida para controlar el efecto de campo en el canal entre el "Source" (fuente) y el "Drain" (drenaje). Los

1) Metal Oxide Semiconductor (semiconductor metal-óxido)

procesos que llevan a la creación de una potencia de carga y, por lo tanto, a una tensión de control  $U_{GS}$  entre la "Gate" (puerta) y el "Source" (fuente) se describen en la ecuación de Nernst:

$$U_{GS} = U_0 + \frac{2,3 \cdot RT}{nF} \cdot \lg a_{ion}$$

$U_{GS}$	Potencia entre la puerta y la fuente	F	Constante de Faraday (26.803 Ah)
$U_0$	Tensión offset	$a_{ion}$	Actividad del tipo de ion ( $H^+$ )
R	Constante de los gases (8,3143 J/molK)	$\frac{2,3 \cdot RT}{nF}$	Factor Nernst
T	Temperatura [K]		
n	Valencia (1/mol)		

En 25 °C (77 °F) el factor Nernst de la medición de pH tiene el valor -59,16 mV/pH.


**Sistema de medición**

Un sistema de medición completo comprende por lo menos:

- Sensores ISFET
- Cable de datos CYK10 para Memosens
- Transmisor, p. ej., Liquiline CM44x, Liquiline CM42
- Portasondas
  - Portasondas de inmersión, p. ej. Dipfit CPA111
  - Cámara de flujo, p. ej. Flowfit CPA250
  - Portasondas retráctil, p. ej., Cleanfit CPA875
  - Portasondas de instalación permanente, p. ej., Unifit CPA842

Hay disponibles opciones adicionales según la aplicación:

Sistema automático de limpieza y calibración, p. ej., Liquiline Control CDC90

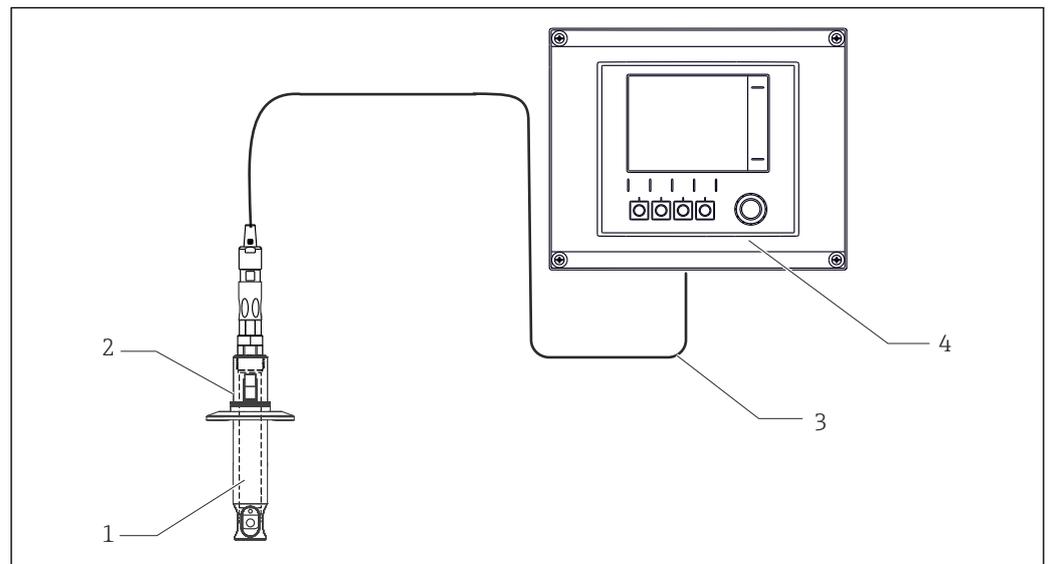

3 Ejemplo de un sistema de medición

- 1 Sensores ISFET
- 2 Portasondas de instalación Unifit CPA842
- 3 Cable de datos CYK10 para Memosens
- 4 Transmisor Liquiline CM42

## Comunicación y procesamiento de datos

### Comunicación con el transmisor

 Los sensores digitales con tecnología Memosens siempre se deben conectar a un transmisor con tecnología Memosens. No resulta posible transmitir datos a un transmisor para sensores analógicos.

Los sensores digitales pueden guardar datos del sistema de medición en el sensor mismo. Entre estos se incluyen los siguientes:

- Datos del fabricante
  - Número de serie
  - Código de pedido
  - Fecha de fabricación
- Datos de calibración
  - Fecha de calibración
  - Pendiente a 25 °C (77 °F)
  - Punto de funcionamiento a 25 °C (77 °F)
  - Offset del sensor de temperatura integrado
  - Número de calibraciones
  - Historial de calibración
  - Número de serie del transmisor utilizado para llevar a cabo la última calibración o el último ajuste
- Datos de funcionamiento
  - Rango de aplicación de temperatura
  - Rango de aplicación de pH
  - Fecha de la puesta en marcha inicial
  - Valor máximo de temperatura
  - Horas de funcionamiento en condiciones extremas
  - Número de esterilizaciones
  - Contador CIP
  - Carga del sensor

Los datos mencionados anteriormente se pueden visualizar con Liquiline CM42, CM44x, y Memobase Plus CYZ71D.

## Confiabilidad

### Fiabilidad

#### Fácil manejo

Los sensores con tecnología Memosens disponen de una electrónica integrada que almacena datos de calibración y otro tipo de información (p. ej., el total de horas en funcionamiento o las horas en funcionamiento en condiciones de medición extremas). Una vez instalado el sensor, los datos del sensor se transfieren automáticamente al transmisor y se utilizan para calcular el valor de corriente actual. Todos los datos de calibración se almacenan en el sensor, el sensor puede ser calibrado y ajustado independientemente del punto de medición. Como resultado:

- La calibración sencilla en el laboratorio de medición bajo condiciones externas óptimas aumenta la calidad de la calibración.
- Los sensores precalibrados pueden ser sustituidos rápida y fácilmente, lo que resulta en un aumento dramático en la disponibilidad del punto de medición.
- Gracias a la disponibilidad de los datos del sensor, se pueden definir de manera precisa los intervalos de mantenimiento y es posible un mantenimiento predictivo.
- El historial del sensor se puede documentar en portadores de datos externos y programas de evaluación.
- Los datos de aplicación guardados del sensor se pueden utilizar para determinar el uso continuado del sensor con respecto a un objetivo.

#### Integridad

#### Seguridad de datos gracias a la transmisión de datos digital

La tecnología Memosens digitaliza los valores medidos en el sensor y envía los datos al transmisor mediante una conexión sin contacto que está exenta de interferencias potenciales. Como resultado:

- Si el sensor falla o se interrumpe la conexión entre el sensor y el transmisor, esto se detecta de manera fiable y se informa.
- La disponibilidad del punto de medición se detecta de manera fiable y se informa.

## Seguridad

### Seguridad máxima en el proceso


Con la transmisión inductiva del valor de medición mediante una conexión no invasiva, el Memosens garantiza una seguridad de proceso máxima y proporciona las ventajas siguientes:

- Se eliminan todos los problemas que provoca la humedad:
  - No hay corrosión en la conexión
  - La humedad no puede distorsionar los valores medidos
- El transmisor está galvánicamente desacoplado del producto. Los problemas en relación con la alta impedancia simétrica, la asimetría o el tipo de convertidor de impedancia son cosa del pasado.
- La compatibilidad electromagnética (EMC) se garantiza escaneando las mediciones para la transmisión digital de los valores medidos.
- La electrónica intrínsecamente segura implica que puede funcionar sin problemas en zonas con peligro de explosión. Flexibilidad total gracias a homologaciones Ex para cada tipo de componentes, como sensores, cables y transmisores.

## Entrada

<b>Variable medida</b>	valor pH Temperatura
<b>Rango de medición</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ pH: 0 ... 14</li> <li>■ Temperatura: -15 ... 135 °C (5 ... 275 °F)</li> </ul> <p> Tenga en cuenta las condiciones de funcionamiento del proceso.</p>

## Alimentación

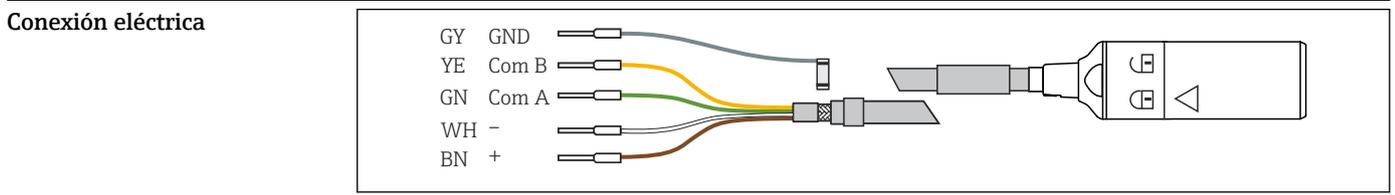

 4 Cable de medición CYK10 o CYK20


- ▶ Conecte el cable de medición Memosens, p. ej. CYK10 o CYK20, al sensor.

 Para más información sobre el cable CYK10, véase BA00118C

## Características de funcionamiento

<b>Condiciones de funcionamiento de referencia</b>	Temperatura referencia: 25 °C (77 °F) Presión de referencia: 1.013 hPa (15 psi)
<b>Sistema de referencia</b>	Conductor de referencia Ag/AgCl, electrolito intermedio: KCl líquido, 3M, sin AgCl
<b>Histéresis</b>	Otra ventaja importante respecto a los electrodos de vidrio de pH son sus menores errores ácido o alcalino en rangos de pH extremos. A diferencia del electrodo de vidrio de pH, en la puerta del ISFET apenas se pueden acumular iones del exterior. Entre pH 1 y pH 13, la media del error medido es $\Delta$ pH 0,02 (a 25 °C (77 °F)), por lo que se encuentra en el límite de detección.

El gráfico siguiente muestra la media del error medido del sensor ISFET en el rango de pH entre 1 y 13 en comparación con dos electrodos de vidrio de pH (dos vidrios de pH diferentes) en los valores extremos de pH 0,09 (1 M HCl) y 13,86 (1 M NaOH).

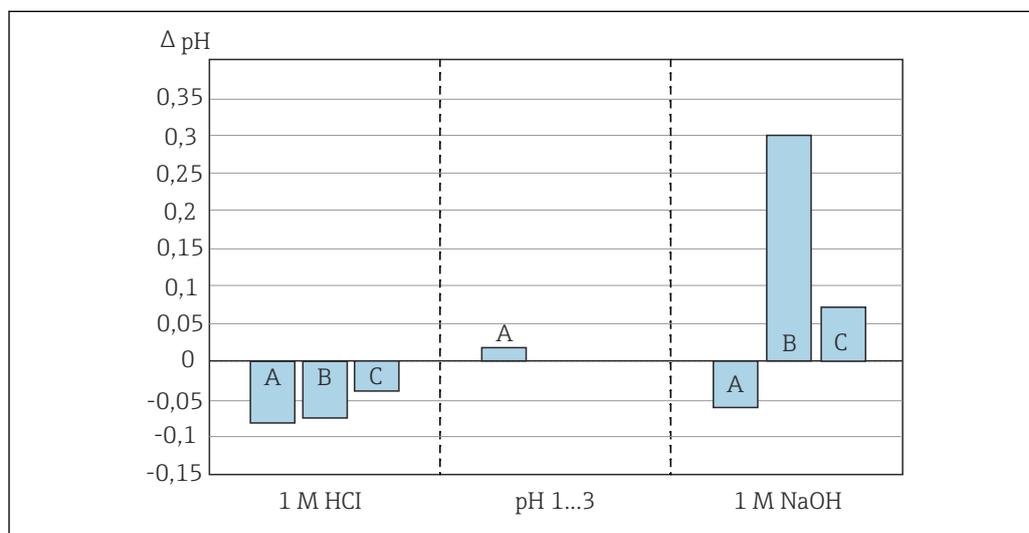

5 Errores medidos del sensor ISFET comparados con distintos sensores de pH

- A ISFET CPSx7D  
 B Vidrio tipo A  
 C Vidrio tipo B

#### Repetibilidad

± 0,01 pH

#### Tiempo de respuesta

Cada vez que se activa el sistema de medición se crea un lazo de control cerrado. El valor medido se ajusta durante este tiempo al valor real.

La fase transitoria varía en función de la duración y del tipo de interrupción:

- Interrupción de tensión, el sensor permanece en el producto: 3 a 5 minutos
- Interrupción de la película de líquido entre el ISFET y la referencia: 5 a 8 minutos
- Almacenamiento seco del sensor durante un largo periodo: hasta 30 minutos

#### Tiempo de respuesta

Los tiempos de respuesta del sensor son muy cortos en todo el rango de temperatura. No hay ajuste de equilibrio (dependiente de la temperatura). Esto significa que también se puede utilizar a baja temperatura sin que haya una deceleración en el tiempo de respuesta.

#### Tiempo de respuesta $t_{90}$



$t < 5$  segundos, para un cambio de solución amortiguadora de pH 4 a pH 7 y en condiciones de funcionamiento de referencia

- i** La respuesta del sensor de temperatura integrado puede ser más lenta en caso de cambios de temperatura extremos. En este caso, regule la temperatura del sensor antes de la calibración o de la medición.

## Instalación

#### Orientación

1. Tenga en cuenta la dirección del caudal del producto al instalar el sensor.
2. Posicione el chip del ISFET de forma que presente un ángulo de aprox. 30 ... 45 ° respecto a la dirección del flujo (elemento 2) → 7, 7. Use para este fin el cabezal de conexión rotativo.

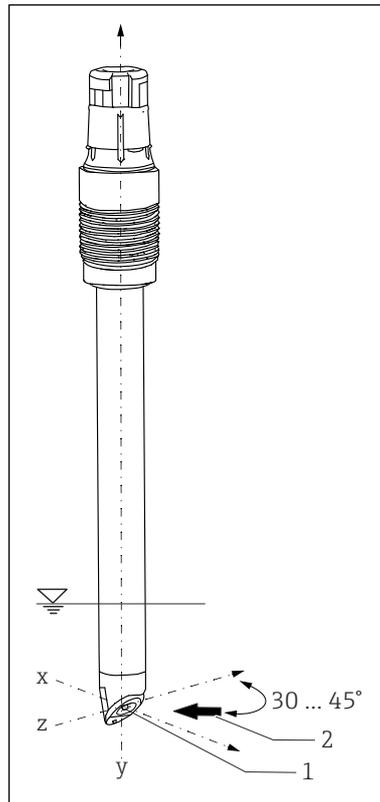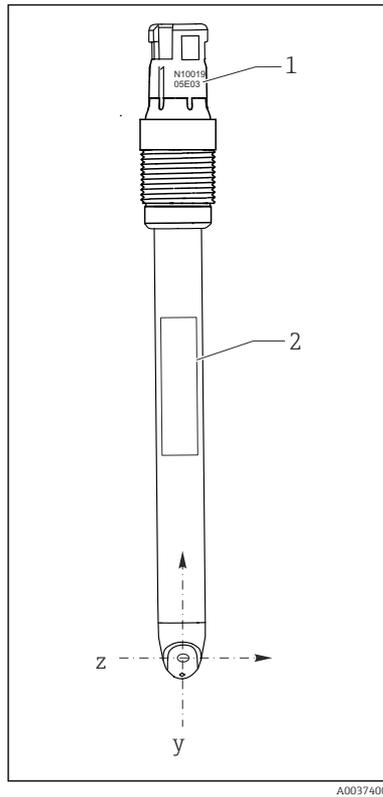

6 Orientación del sensor, vista frontal

- 1 Número de serie
- 2 Placa de identificación


7 Orientación del sensor, vista tridimensional

- 1 Chip ISFET
- 2 Dirección del caudal del producto

Cuando instale el sensor en un portasondas, el número de serie grabado en el cabezal de conexión se puede usar como guía para alinear el sensor → 6, 7. El grabado se encuentra siempre en el mismo plano que el chip ISFET y la placa de identificación (dirección z-y).

**i** Los sensores ISFET no están diseñados para su uso en productos corrosivos. Sin embargo, si se utilizan para este tipo de aplicaciones, compruebe que el chip esté aislado del caudal. Así se alarga la vida útil del sensor y se reducen las desviaciones del sensor. La desventaja es que el valor de pH indicado no es estable.

Los sensores ISFET se pueden instalar en cualquier posición porque no existe ningún líquido conductor en el interior. No obstante, si se instala cabeza abajo no se puede descartar la posibilidad de que se forme una burbuja de aire en el sistema de referencia e interrumpa el contacto eléctrico entre el producto y la unión.

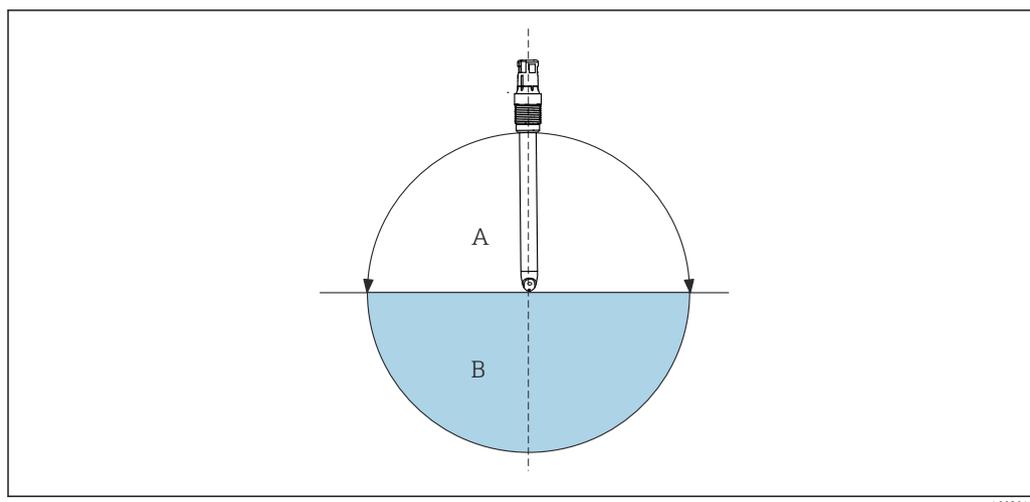

A0030407

### 8 Ángulo de instalación

A Recomendado

B Admisible; preste atención a las condiciones básicas → 7

Condiciones básicas: El sensor se entrega de fábrica sin burbujas de aire. Sin embargo, pueden aparecer burbujas de aire cuando se trabaja con vacío, p. ej., durante el vaciado de un depósito.

**i** El sensor instalado debe permanecer seco durante 6 horas como máximo (también en caso de instalación cabeza abajo).

## Instrucciones de instalación

**i** Para consultar los detalles sobre las instrucciones de instalación del portasondas, vea el manual de instrucciones del portasondas que utiliza.

1. Antes de enroscar el sensor, compruebe que la rosca del portasondas, las juntas tóricas y la superficie de estanqueidad estén limpias y sin daños y que la rosca gire con facilidad.
2. Enrosque el sensor y apriételo a mano con un par de apriete de 3 Nm (2,21 lbf ft) (las especificaciones solo se aplican si se instala en portasondas de Endress+Hauser).

Para obtener información detallada sobre cómo retirar el capuchón de humectación, véase BA02154C

### Requisitos higiénicos

Los equipos destinados a aplicaciones higiénicas presentan requisitos específicos de instalación. Estos deben ser tenidos en cuenta a fin de garantizar un funcionamiento higiénico sin contaminación del producto del proceso.

**i** Documentación especial para aplicaciones higiénicas, SD02751C

Para que la instalación cumpla los requisitos 3-A o EHEDG y resulte fácil de limpiar, tenga en cuenta lo siguiente:

- Use un portasondas de proceso que esté certificado
- Use un portasondas de proceso que cuente con un protector en torno al sensor
- La instalación debe contar con autodrenaje
- Se deben evitar las zonas muertas

**i** Se recomienda cambiar el sensor al cabo de 20 ciclos CIP.

## Entorno

### Rango de temperatura atmosférica

#### AVISO

¡Riesgo de daños por congelación!

- ▶ No use el sensor a temperaturas por debajo de .

**Temperatura de almacenamiento** 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)

**Sensibilidad a la luz**

**AVISO**

**Luz solar directa durante la calibración y el funcionamiento**

Fluctuaciones en el valor medido.

- ▶ Evite la luz solar directa durante la calibración y el funcionamiento.

Como cualquier otro elemento semiconductor, el chip ISFET es un elemento sensible a la luz. La luz de ambiente normal no afecta a la medición de manera significativa.

**Grado de protección**

IP 68 (columna de agua de 10 m (33 ft), 25 °C (77 °F), 45 días, hasta 135 °C (275 °F)) posibilidad de autoclave

**Compatibilidad electromagnética (EMC)**

Emisión de interferencias e inmunidad ante interferencias según

- EN 61326-1:2013
- EN 61326-2-3:2013
- NAMUR NE21: 2012


## Proceso

**Rango de temperatura del proceso**

-15 ... 135 °C (5 ... 275 °F)

**La temperatura del producto depende del valor de pH**

A temperaturas altas, los álcalis pueden dañar de forma irreversible el óxido aislador de la puerta con el tiempo. El sensor solo se puede utilizar en el rango marcado (→  9,  9) en detrimento de la vida útil del sensor. Si se expone permanentemente a 1 NaOH molar a temperaturas por encima de 65 °C (149 °F), la vida útil del sensor se reduce hasta el punto en que no se recomienda la operación permanente en este rango.

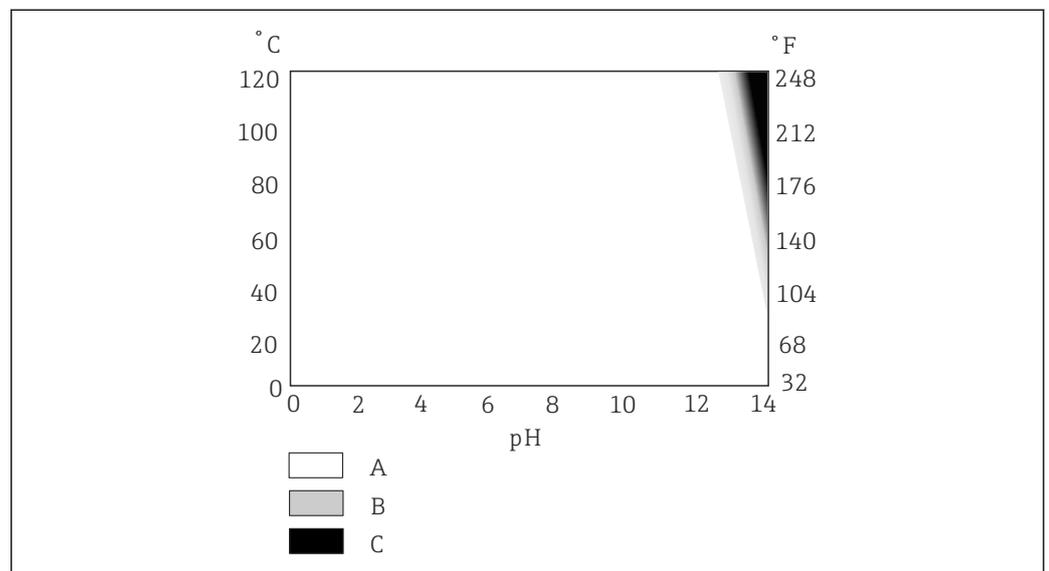

 9 La zona de aplicación depende de la temperatura y el valor de pH

- A Se puede utilizar sin problemas
- B Vida útil limitada
- C Uso no recomendado

**Rango de presión del proceso** 0,8 ... 11 bar (11,6 ... 159,5 psi) (absoluta)

**Conductividad**

Conductividad mínima <sup>2)</sup>: 50 µS/cm

**Rangos de presión/  
temperatura**


**AVISO**

**Riesgo de daños en el sensor.**

- ▶ No use el sensor en ningún caso fuera de las especificaciones indicadas.

Máximo 11 bar (160 psi) (absoluta)/100 °C (212 °F)

Esterilizable: 4 bar (58 psi) (absoluta)/135 °C (275 °F), 1 h

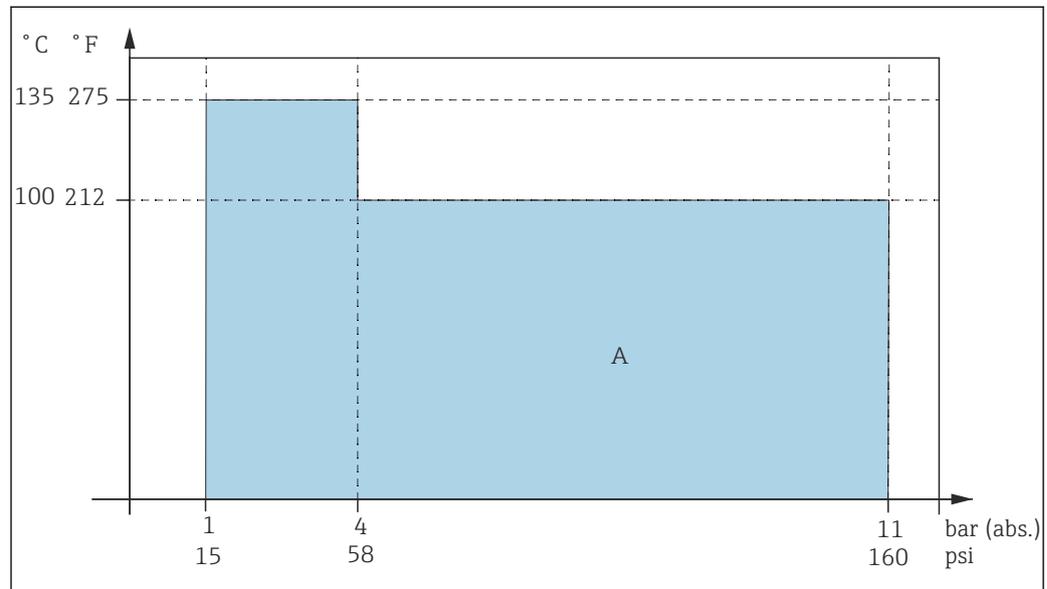

A0044851


10 Rango de presión/temperatura

A Área de aplicación

2) Condiciones de referencia: Agua desmineralizada como producto de medición cuya conductividad se ha ajustado con NaOH, KCl o HCl; temperatura ambiente; funcionamiento del sensor sin presurizar; cambio entre producto estacionario y flujo de producto hacia el sensor con una velocidad de fluido de 2 m/s (6,6 ft/s) con flujo lateral de producto en la dirección del chip ISFET; el valor de conductividad indicado es el valor determinado cuando el valor medido cambia menos de 0,2 pH en todos los productos entre productos estacionarios y productos en flujo.

## Estructura mecánica

### Diseño, medidas

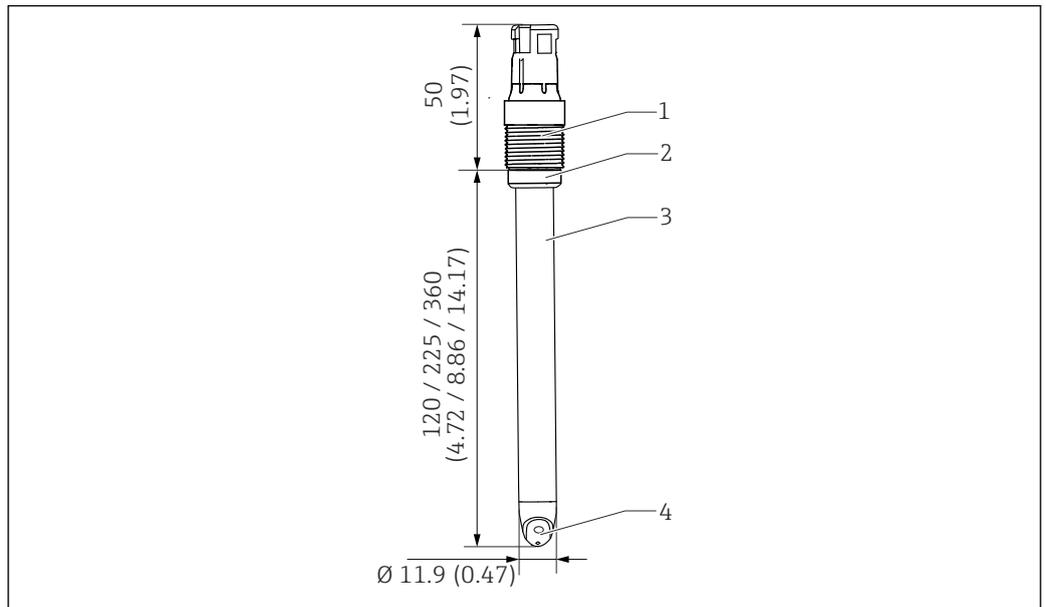

11 Sensor con cabezal de conexión Memosens. Unidad física: mm (in)

- 1 Cabezal de conexión Memosens con conexión a proceso
- 2 Junta tórica con anillo de empuje
- 3 Eje del sensor
- 4 Chip ISFET

### Peso

Longitud instalada	120 mm (4,72 in)	225 mm (8,86 in)	360 mm (14,17 in)
Peso	35 g (1,2 oz)	50 g (1,8 oz)	66 g (2,3 oz)

### Materiales

Eje del sensor	PEEK
Juntas	FFKM
Conductor metálico	Ag/AgCl
Junta tórica	FKM
Unión o unión abierta	Unión cerámica, dióxido de circonio
Acoplamiento a proceso	Fibra de vidrio PPS reforzada
Placa de identificación	Cerámica de óxido de aluminio

### Resistencia a roturas

La resistencia a las roturas del sensor es su característica externa más destacable. Toda la tecnología de sensores está incorporada en el cuerpo de PEEK. Solo el chip ISFET de larga duración y la referencia están en contacto directo con el producto.

### Sensor de temperatura

Pt1000 (Clase A de acuerdo con DIN IEC 60751)

### Cabezal de conexión

Cabezal de conexión Memosens para la transmisión de datos digital sin contacto, resistencia a presión 16 bar (232 psi) (relativa)

### Conexiones a proceso

Pg 13.5

### Rugosidad superficial

$R_a < 0,76 \mu\text{m}$  (30  $\mu\text{in}$ )

## Certificados y homologaciones

Los certificados y homologaciones actuales del producto están disponibles mediante el Product Configurator en [www.endress.com](http://www.endress.com).

1. Seleccione el producto con los filtros y el campo de búsqueda.
2. Abra la página de producto.

Con el botón **Configuración** se abre el Product Configurator.

## Información para cursar pedidos

### Alcance del suministro

El alcance del suministro incluye:

- Sensor en la versión de su pedido
- Manual de instrucciones
- Instrucciones de seguridad para zonas con peligro de explosión (para sensores con homologación Ex)

### Página de producto

[www.endress.com/cps77e](http://www.endress.com/cps77e)

### Configurador de producto

En la página del producto hay un **Configurar** botón a la derecha de la imagen del producto.

1. Haga clic en este botón.
  - ↳ Se abre una nueva ventana para el Configurator.
2. Seleccione todas las opciones para configurar el equipo según sus requisitos.
  - ↳ De esta forma, recibirá un código de producto válido y completo para el equipo.
3. Exporte el código de producto en un archivo Excel o PDF. Para ello, pulse el botón correcto en la parte superior derecha de la ventana de selección.

 Para muchos productos también tiene la opción de descargar dibujos 2D o CAD de la versión del producto seleccionada. Haga clic en **CAD** la pestaña para esto y seleccione el tipo de archivo deseado utilizando las listas de selección.

## Accesorios

Se enumeran a continuación los accesorios más importantes disponibles a la fecha de impresión del presente documento.

- ▶ Póngase en contacto con la Oficina de ventas o servicios de su zona para que le proporcionen información sobre accesorios no estén incluidos en esta lista.

### Accesorios específicos del equipo

#### Portasondas

##### Unifit CPA842

- Portasondas de instalación para la industria de alimentación, biotecnología y farmacéutica
- Con certificado EHEDG y 3A
- Product Configurator de la página de productos: [www.es.endress.com/cpa842](http://www.es.endress.com/cpa842)



Información técnica TI00306C

##### Cleanfit CPA875

- Portasondas retráctil para procesos para aplicaciones higiénicas y de esterilidad
- Para la medición en línea con sensores estándares con un diámetro de 12 mm, p. ej. de pH, redox u oxígeno
- Product Configurator de la página de productos: [www.es.endress.com/cpa875](http://www.es.endress.com/cpa875)



Información técnica TI01168C

#### **Dipfit CPA111**

- Portasondas de inmersión e instalación hecho de plástico para depósitos abiertos y cerrados
- Product Configurator de la página de productos: [www.es.endress.com/cpa111](http://www.es.endress.com/cpa111)

 Información técnica TI00112C

#### **Cleanfit CPA871**

- Portasondas de inserción de procesos flexible para las industrias de agua, de aguas residuales y química
- Para aplicaciones con sensores estándares con un diámetro de 12 mm
- Product Configurator de la página de productos: [www.es.endress.com/cpa871](http://www.es.endress.com/cpa871)

 Información técnica TI01191C

#### **Cleanfit CPA450**

- Portasondas retráctil manual para instalar sensores de 12 mm de diámetro y 120 mm de longitud en depósitos y tuberías
- Configurator de producto en la página de producto: [www.endress.com/cpa450](http://www.endress.com/cpa450)

 Información técnica TI00183C

#### **Flowfit CPA250**

- Cámara de flujo para la medición de pH/redox
- Product Configurator de la página de productos: [www.es.endress.com/cpa250](http://www.es.endress.com/cpa250)

 Información técnica TI00041C

### **Sistema de limpieza y calibración**

#### **Liquiline Control CDC90**

- Sistema de limpieza y calibración totalmente automático para puntos de medición de pH y redox en todas las industrias
- Limpio, validado, calibrado y ajustado
- Product Configurator de la página de productos: [www.es.endress.com/cdc90](http://www.es.endress.com/cdc90)

 Información técnica TI01340C

### **Soluciones amortiguadoras**

#### **Soluciones amortiguadoras de alta calidad de Endress+Hauser - CPY20**

Las soluciones amortiguadoras secundarias han sido calibradas utilizando material de referencia primario del PTB (Instituto físico técnico alemán) o a material de referencia estándar del NIST (National Institute of Standards and Technology) en conformidad con DIN 19266 por un laboratorio acreditado por el DAkkS (Agencia de acreditación alemana) según DIN 17025.  
Product Configurator de la página de productos: [www.endress.com/cpy20](http://www.endress.com/cpy20)

### **Cable de medición**

#### **Cable de datos CYK10 para Memosens**

- Para sensores digitales con tecnología Memosens
- Product Configurator en la página de productos: [www.endress.com/cyk10](http://www.endress.com/cyk10)

 Información técnica TI00118C

#### **Cable de laboratorio CYK20 Memosens**

- Para sensores digitales con tecnología Memosens
- Product Configurator en la página de productos: [www.endress.com/cyk20](http://www.endress.com/cyk20)

### **Instrumento portátil**

#### **Liquiline Mobile CML18**

- Equipo portátil multiparamétrico para laboratorio y campo
- Transmisor fiable con indicador y conexión con aplicaciones de dispositivo móvil
- Product Configurator en la página web del producto: [www.es.endress.com/CML18](http://www.es.endress.com/CML18)

 Manual de instrucciones BA02002C







71541513

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---