











di sistema





Istruzioni di funzionamento

Oxymax W COS31

Sensore di ossigeno dissolto





Panoramica

Ecco come utilizzare le presenti Istruzioni di funzionamento per una messa in servizio dello strumento rapida e in sicurezza:

Istruzioni per la sicurezza

Pagina 4 e seg. Pagina 5 Istruzioni generali per la sicurezza Descrizione dei simboli di pericolo

Le istruzioni speciali per ciascuna posizione si trovano nel relativo capitolo. Le posizioni sono indicate con le icone Pericolo∆, Attenzione de Nota ...

Installazione

Pagina 7 e seg.

Descrizione delle condizioni di installazione, ad esempio le dimensioni del sensore e l'angolo di installazione.

Pagina 9 e seg.

Esempi di installazione.

Cablaggio

Pagina 13 e seg.

Istruzioni per il cablaggio del sensore.

Struttura del sensore e principio di misura

Pagina 15

Descrizione della struttura del sensore. Descrizione del principio di misura.

Pagina 16 e seg. Pagina 16 e seg.

Descrizione dei possibili metodi di calibrazione.

Messa in servizio

Pagina 19 e seg.

Prima della calibrazione, il sensore deve essere polarizzato. Per ulteriori istruzioni, consultare la pagina relativa.

Manutenzione

Pagina 20 e seg. Pagina 21 e seg. È fondamentale eseguire regolarmente le attività di manutenzione previste.

Le singole parti sono soggette alla normale usura. Questa sezione descrive come sostituire le parti usurate.

Pagina 26

Panoramica delle parti di ricambio disponibili e panoramica generale del sistema.

Risoluzione dei problemi

Pagina 24 e seg.

Se durante il funzionamento si verifica un guasto, usare l'elenco di controllo per individuarne la causa.

Indice analitico

Pagina 29 e seg.

Nelle singole sezioni è possibile trovare termini e parole chiave importanti. Utilizzare la parola chiave per trovare le informazioni necessarie in modo rapido ed efficiente.

Indice

1	Istruzioni di sicurezza 4
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	Uso previsto
1.5 2	Identificazione 6
2.1 2.2	Struttura dei pacchetti di prodotti 6 Fornitura
3	Installazione 6
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	Accettazione alla consegna, trasporto, immagazzinamento 6 Condizioni di installazione 7 Istruzioni per l'installazione 8 Esempi di installazione 9 Controllo successivo all'installazione 12
4	Cablaggio
4.1 4.2 4.3	Connessione diretta al trasmettitore
5	Utilizzo 15
5.1 5.2 5.3	Struttura del sensore.15Principio di misura16Calibrazione16
6	Messa in servizio 19
6.1 6.2 6.3	Verifica funzionale19Polarizzazione19Calibrazione19
7	Manutenzione
7.1 7.2	Pulizia del sensore
8	Accessori
8.1 8.2 8.3	Accessori per il collegamento23Accessori per l'installazione23Misura, controllo e pulizia del sensore23
9	Risoluzione dei problemi 24
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5	Istruzioni per la risoluzione dei problemi.24Controlli del sensore.25Pezzi di ricambio26Ritorno in fabbrica26Smaltimento26

10	Dati tecnici
10.2 10.3 10.4	Ingresso2Caratteristiche prestazionali2Ambiente2Processo2Struttura meccanica2
	Indice analitico 29

3

Istruzioni per la sicurezza Oxymax W COS31

1 Istruzioni per la sicurezza

1.1 Uso previsto

Il sensore di ossigeno è adatto alla misura continua dell'ossigeno dissolto.

Le applicazioni tipiche sono:

- Misura del contenuto di ossigeno nelle vasche di fanghi attivi.
 Il segnale di misura è utilizzato per il monitoraggio e come parametro di controllo.
- Controllo del contenuto di ossigeno all'uscita di un impianto di trattamento delle acque reflue.
- Misura e controllo del contenuto di ossigeno in un allevamento ittico.
- Arricchimento dell'ossigeno in acqua potabile.

Gli usi diversi da quelli descritti in questo manuale possono compromettere la sicurezza delle persone e del sistema di misura nella sua interezza, pertanto non sono consentiti. Il produttore non è responsabile per danni imputabili a un uso improprio o diverso da quello previsto.

1.2 Installazione, avviamento e funzionamento

Leggere attentamente quanto segue:

- L'installazione, il collegamento elettrico, la messa in servizio e gli interventi di manutenzione del sistema di misura devono essere effettuati esclusivamente da tecnici specializzati.

 Per poter intervenire, gli addetti devono ricevere l'autorizzazione dal proprietario del sistema.
- Il personale tecnico deve aver letto e compreso le presenti istruzioni di funzionamento e deve attenersi ad esse.
- Prima di procedere alla messa in servizio del sistema di misura nel suo complesso, verificare che tutte le connessioni siano state effettuate correttamente. Verificare che i cavi elettrici e i tubi flessibili di collegamento non siano danneggiati.
- Non utilizzare i prodotti eventualmente danneggiati e fare in modo che non possano essere messi in servizio per errore. A questo scopo, contrassegnare il prodotto come "guasto".
- In caso di guasto, le riparazioni sul punto di misura possono essere effettuate esclusivamente da personale autorizzato e appositamente addestrato.
- Qualora le riparazioni non siano possibili, i prodotti interessati dovranno essere messi fuori servizio prendendo le misure necessarie per evitare che possano essere utilizzati per errore.
- Le riparazioni non descritte in queste istruzioni operative possono essere eseguite solo presso lo stabilimento del produttore o un centro di assistenza tecnica .

1.3 Sicurezza operativa

Il sensore è stato progettato e collaudato in base alla più moderna tecnologia e ha lasciato la fabbrica in condizioni operative perfette.

Il dispositivo è conforme alle norme e alle direttive europee applicabili.

L'operatore deve rispettare le seguenti norme di sicurezza:

- Istruzioni per l'installazione
- Norme e standard locali applicabili.

1.4 Spedizione in fabbrica

Se lo strumento deve essere riparato, inviarlo pulito all'ufficio vendite Endress+Hauser di competenza. Se possibile, utilizzare l'imballaggio originale.

Accludere una copia della "Dichiarazione di decontaminazione" compilata (fotocopiare la penultima pagina di queste Istruzioni di funzionamento) al collo, unitamente alle bolle di accompagnamento per la spedizione.

Senza la "Dichiarazione di decontaminazione" non sarà possibile effettuare alcuna riparazione!

Oxymax W COS31 Istruzioni per la sicurezza

1.5 Note sulle icone e i simboli per la segnalazione di indicazioni sulla sicurezza



Avviso!

Questo simbolo indica un pericolo. In caso di mancata osservanza si possono provocare gravi danni allo strumento o alle persone.



Attenzione!

Le istruzioni contrassegnate da questo simbolo, se ignorate, indicano possibili anomalie In caso di mancata osservanza si possono provocare danni allo strumento.



Nota!

Questo simbolo introduce informazioni importanti.

Identificazione Oxymax W COS31

2 Identificazione

2.1 Struttura dei pacchetti di prodotti

	Certificato				
	Α	Ver	Versione sicura		
		Lui	nghe	zza di cavo	
		0	Lur	ghezza del cavo 1,5 m	
		2	Lur	ghezza del cavo 7 m	
		4	Lur	ghezza del cavo 15 m	
		8	Sen	za cavo (solo versione TOP 68)	
		9	In b	ase alle specifiche del cliente	
			Connessione via cavo		
			F	Connessione via cavo fisso	
			S	Connessione via cavo mediante connettore TOP 68	
			Membrana di separazione		
				Membrana di separazione COY31-WP, portata minima 5 mm/s, per tempo di risposta normale	
				2 Membrana di separazione COY31-S-WP, portata minima 25 mm/s, per tempo di risposta rapido	
COS31-				Codice completo ordine	

2.2 Oggetto della fornitura

La fornitura comprende i seguenti elementi:

- Sensore di ossigeno con coperchio di protezione per il trasporto della membrana
- Set accessori contenente:
 - 2 cartucce sostitutive (membrana sostitutiva),
 - 10 flaconi in plastica contenenti elettrolita predosati
 - 1 kit di tenuta con 3 O-ring
 - 6 fogli abrasivi
- Istruzioni di funzionamento in italiano

In caso di dubbi, contattare il fornitore o l'ufficio commerciale più vicino.

3 Installazione


3.1 Accettazione, trasporto e immagazzinamento

- Assicurarsi che l'imballaggio non sia danneggiato!
 Qualora l'imballo risulti danneggiato, informare il fornitore.
 Conservare l'imballo danneggiato fino al momento della risoluzione del problema.
- Assicurarsi che il contenuto non sia danneggiato!
 Qualora il materiale consegnato avesse subito danni, informare il fornitore.
 Conservare i prodotti danneggiati fino a quando il problema non sarà stato risolto.
- Verificare che siano stati consegnati tutti i materiali richiesti e che la spedizione sia conforme all'ordine e alle bolle di accompagnamento.
- L'imballo utilizzato per l'immagazzinamento o il trasporto del prodotto deve garantirne la protezione dagli urti e dall'umidità. L'imballo originale garantisce una protezione ottimale. Osservare anche le condizioni ambientali indicate (vds. "Dati tecnici").
- In caso di dubbi, contattare il fornitore o l'ufficio commerciale più vicino.

Oxymax W COS31 Installazione

3.2 Condizioni di installazione

3.2.1 Dimensioni

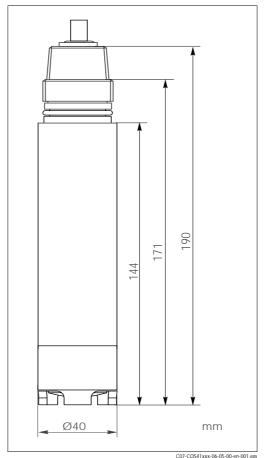

190 mm Ø40

Fig. 1: Versione cavo fisso

Fig. 2: Versione testa a innesto TOP 68

3.2.2 Angolo di installazione

Il sensore può essere installato fino alla posizione orizzontale in un'armatura, un supporto o una connessione al processo adatta (fig. 3). Non sono consentite altre angolazioni. Non installare il sensore sottosopra.

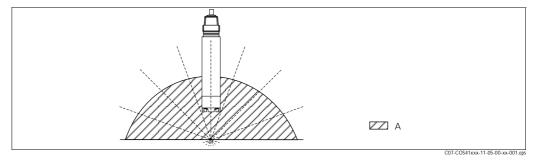


Fig. 3: Angolo di installazione

Posizioni di installazione consentite: 0 ... 180 °, installazione in posizione sottosopra non consentita



Nota!

Verificare la conformità alle istruzioni per l'installazione dei sensori. Tali istruzioni si trovano nelle Istruzioni di funzionamento dell'armatura utilizzata.

Installazione Oxymax W COS31

3.2.3 Posizione di installazione

- Scegliere la posizione di installazione in modo che sia facilmente accessibile per future calibrazioni.
- Verificare che i pali verticali e le armature siano fissati in sicurezza e privi di vibrazioni.
- Per il funzionamento a contatto con il liquido di processo in una vasca di fanghi attivi, scegliere una posizione di installazione che produca una concentrazione di ossigeno tipica.

3.3 Istruzioni per l'installazione

3.3.1 Sistema di misura

Un sistema di misura completo deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- · Sensore di ossigeno
- Trasmettitore, ad es. Liquisys M COM223/253-WX/WS
- · Cavo di misura speciale
- Armatura, ad es. cella a deflusso COA250, armatura di immersione COA110 o armatura retrattile COA451

Opzionale:

- Supporto universale per armature sospese CYH 101 per funzionamento a contatto con il fluido di processo
- Scatola di derivazione VS (con estensione cavo)
- Sistema di pulizia spray automatico Chemoclean

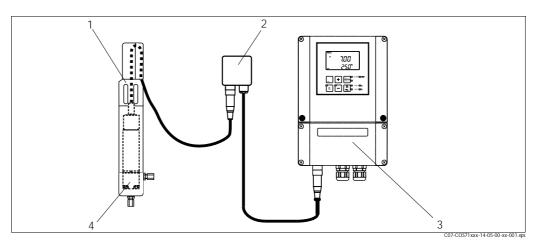


Fig. 4: Esempi del sistema di misura

- 1 Cella a deflusso
- 2 Scatola di derivazione VS (opzionale)
- 3 Trasmettitore Liquisys M COM253
- 4 Sensore di ossigeno

3.3.2 Installazione di un punto di misura



Nota!

Per il funzionamento a contatto con il fluido di processo, installare i singoli moduli distanti dalla vasca, su una base solida. Effettuare l'installazione definitiva solo nella posizione prescelta.

Allo scopo di eseguire un'installazione completa del punto di misura, procedere come segue:

- 1. Installare un'armatura retrattile o una cella a deflusso (se utilizzata) nel processo.
- 2. Collegare l'alimentazione di acqua al collegamento di pulizia (se si utilizza un'armatura con funzione di pulizia).
- 3. Installare e collegare il sensore di ossigeno.
- 4. Installare un'armatura sospesa o di immersione (se utilizzata) nel processo.

Oxymax W COS31 Installazione



Attenzione!

- Per il funzionamento in immersione, il sensore deve essere installato in una armatura di immersione (ad es. CYA 611). **Non installare il sensore sospeso dal cavo.**
- Avvitare il sensore nell'armatura evitando di attorcigliare il cavo.
- Non esercitare una forza tensile eccessiva sul cavo (ad es. non tirare il cavo).
- Scegliere la posizione di installazione in modo che sia facilmente accessibile per future calibrazioni.



Avviso!

Se si utilizzano armature metalliche e accessori di installazione, rispettare le norme nazionali di messa a terra.

3.4 Esempi di installazione

3.4.1 Funzionamento in immersione

Palina verticale e armatura a catena

Nelle grandi vasche, dove è necessaria una distanza minima dai bordi della vasca (specialmente nelle vasche di aerazione), è consigliato l'utilizzo della palina verticale e dell'armatura a catena (fig. 5, fig. 6). Il movimento libero dell'armatura immersa elimina le vibrazioni dalla palina verticale. Una buona auto pulizia della superficie della membrana è possibile grazie al movimento dell'armatura. Grazie a questo effetto, la vita operativa del sensore è automaticamente migliorata.

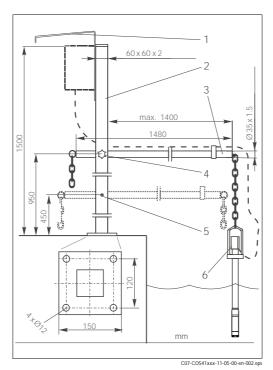


Fig. 5: Sostegno universale per armatura di immersione con telaio basculante

- 1 Tettucccio di protezione dalle intemperie
- Palina verticale, tubo quadrato SS AISI 304
- 3 Tubo trasversale SS AISI 304
- 4 Maniglia a stella
- 5 Seconda possibilità di fissaggio per tubo trasversale
- 6 Armatura di immersione CYA 611

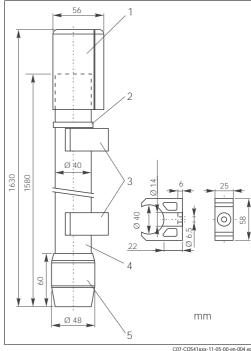


Fig. 6: Armatura di immersione CYA 611

- 1 Coperchio di protezione
- 2 Connettore filettato per tubo multiplo
- 3 Connettore per tubo (schema dettagliato nel lato destro)
- 4 Tubo in PVC
- Raccordo filettato

Installazione Oxymax W COS31

Palina verticale e armatura di immersione fissa

Il tipo di installazione migliore per flussi forti e turbolenti (> 0,5 m/s) in vasche o canali aperti prevede il fissaggio dello strumento a una palina verticale e a un tubo di immersione saldamente montato (fig. 7). Se il flusso è molto forte, è possibile installare un secondo tubo trasversale con il proprio sostegno per il tubo.

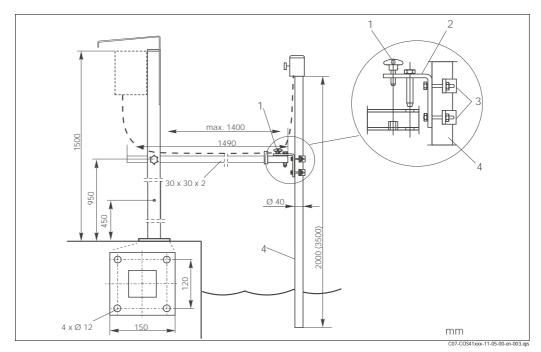


Fig. 7: Sostegno universale per armatura di immersione con relativa armatura di immersione

- 1 Maniglia a stella
- 2 Sostegno tubo
- 3 Staffa di fissaggio
- 4 Armatura di immersione (= tubo di immersione)

Montaggio a bordo vasca

Per il fissaggio ai bordi della vasca o del canale si consiglia l'uso di un supporto per il montaggio a bordo vasca dell'armatura a immersione (fig. 8, fig. 9).

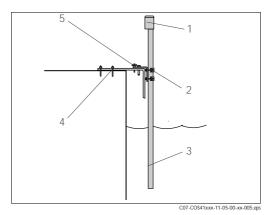


Fig. 8: Montaggio orizzontale a bordo vasca

- 1 Coperchio di protezione per passa cavo
- 2 Sostegno armatura
- 3 Armatura di immersione SS 1.4301 (AISI 304)

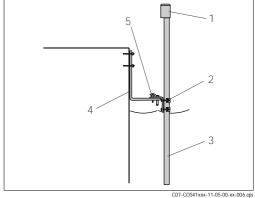


Fig. 9: Montaggio verticale a bordo vasca

- 4 Montaggio a bordo vasca
- 5 Maniglia a stella

In presenza di forti flussi o portate, è necessario utilizzare un secondo montaggio a bordo vasca per l'armatura di immersione.

Oxymax W COS31 Installazione

Corpo galleggiante

Per facilitare l'installazione in livelli idrici con forti fluttuazioni, ad es. in fiumi o laghi, è disponibile il corpo galleggiante COA 110-50 (fig. 10).

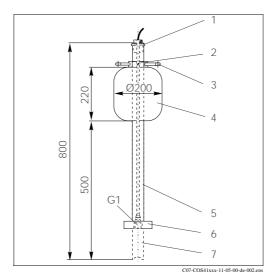


Fig. 10: Corpo Galleggiante

- Canalina anti-torsione e protezione impermeabile
- 2 Anello di montaggio per corde e catene con vite di bloccaggio
- 3 Becchi di ancoraggio Ø 15; 3x120°
- 4 Galleggiante plastico resistente all'acqua marina
- 5 Tubo 40x1, acciaio antiruggine SS 1.4571 (AISI 316Ti)
- 6 Ammortizzatore e peso
- Sensore di ossigeno

3.4.2 Funzionamento portata

La cella a deflusso COA 250-A (fig. 11) con autoventilazione automatica è adatta all'uso in tubazioni o con tubi flessibili di collegamento. L'ingresso è al fondo dell'armatura, l'uscita alla cima (connessione filettata G ¾). Può essere installata in un tubo usando due staffe a 90° per consentire l'afflusso all'armatura (fig. 12, Pos. 6).

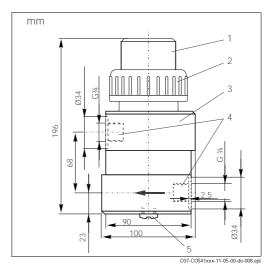


Fig. 11: Cella a deflusso COA 250-A

- 1 Parte avvitabile del sensore
- 2 Anello avvitabile
- 3 Corpo misuratore
- 4 Connessione filettata G¾
- 5 Tappo cieco (connessione per testa spray COR 3)

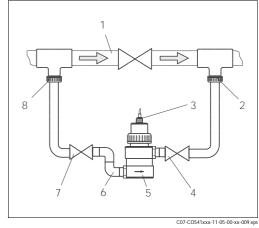


Fig. 12: Installazione bypass con valvole attivate manualmente o valvole solenoidi

- 1 Linea principale
- 2 Ritorno fluido
- 3 Sensore di ossigeno
- 4, 7 Valvole solenoidi o attivate manualmente
- 5 Cella a deflusso COA 250-A
- 6 90 ° staffa a tubo
- 8 Rimozione fluido

Installazione Oxymax W COS31

3.4.3 Armatura retrattile

L'armatura è progettata per l'installazione in serbatoi e tubi. A questo scopo devono essere disponibili tronchetti adatti.

Installare l'armatura in posizioni con portata costante. Il diametro minimo del tubo è DN 80.

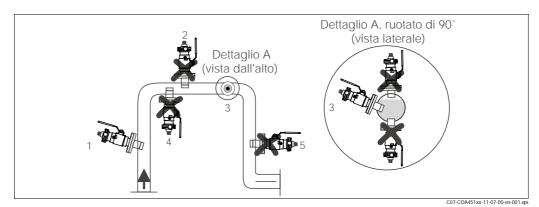


Fig. 13: Posizioni di installazione del sensore consentite e non consentite

- 1 Tubo ascendente, posizione migliore
- 2 Tubo orizzontale, sensore capovolto, non consentito per il rischio di formazione di cuscini di aria o schiuma
- 3 Tubo orizzontale, installazione con angoli di emissione consentiti (in base alla versione del sensore)
- 4 Installazione in posizione sottosopra, non consentita a causa del mancato contatto dell'elettrolita con gli elettrodi del sensore
- 5 Tubo di gravità, non consentito



Nota!

- Non installare l'armatura dove possono formarsi schiuma o cuscinetti d'aria o dove le particelle sospese possono posarsi sull'ottica del sensore (→ Fig. 13).
- Possono verificarsi errori di misura se:
 - il sensore non è immerso nel fluido
 - le particelle sospese si posano sulla membrana del sensore
 - il sensore è installato in posizione di sottosopra.

3.5 Verifica finale dell'installazione

- Controllare la tenuta stagna della membrana e sostituirla se necessario.
- La posizione di installazione del sensore è corretta?
- Il sensore è installato in un'armatura e non sospeso da un cavo?
- L'umidità causata dalla pioggia è stata prevenuta mediante l'installazione di un coperchio protettivo sull'armatura di immersione?

Oxymax W COS31 Cablaggio

4 Cablaggio



Avviso!

- I collegamenti elettrici devono essere effettuati esclusivamente da parte di tecnici autorizzati.
- I tecnici devono aver letto e compreso le istruzioni riportate in questo manuale e devono attenersi ad esse.
- Prima di effettuare i collegamenti, verificare che non vi sia tensione nel cavo di alimentazione.

4.1 Connessione diretta al trasmettitore

La connessione del sensore cambia in base alla versione del trasmettitore:

Strumento da campo (COM253-WX/WS):
 Collegare il sensore direttamente al trasmettitore usando il cavo speciale di misura con connettore SXP.

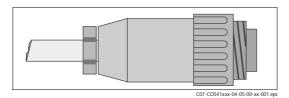


Fig. 14: Connettore SXP

- Strumento con montaggio a fronte quadro (COM223-WX/WS):
 - Rimuovere il connettore SXP (lato trasmettitore!) dal cavo.
 - Le specifiche del cavo e i piedini corrispondenti del Liquisys M COM223-WX/WS sono descritti nella seguente tabella.

Si ricorda che le specifiche del cavo cambiano in base alla versione del sensore (cavo fisso o connessione a innesto TOP68).

Piedini del	Sensore con cavo fisso (OMK)		Sensore con testa a innesto TOP68 (CYK71)	
COM223	Colore	Assegnazione	Colore	Assegnazione
87	giallo	+U _B	giallo	+U _B
0	grigio	OV	bianco	OV
96	rosa	NTC (analogico) o com. (digitale)	verde	Comunicazione (digitale)
97	blu	NTC (analogico) o com. (digitale)	marrone	Comunicazione (digitale)
88	marrone	-U _B	Anima coass.	-U _B
19	verde	Allarme		
18	bianco	Segnale del sensore		

Cablaggio Oxymax W COS31

4.2 Connessione mediante scatola di derivazione

Per allungare la connessione del sensore oltre la lunghezza del cavo fisso, è necessaria una scatola di derivazione VS (fig. 15, fig. 16).

Collegare sempre il cavo del sensore con il connettore SXP alla scatola di derivazione. L'estensione del cavo al trasmettitore dipende dalla versione del trasmettitore, ad es. strumento da campo o montaggio a fronte quadro.

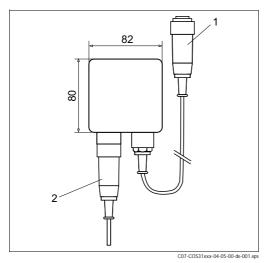


Fig. 15: Scatola di derivazione VS a uno strumento da campo

- 1 Connettore SXP a uno strumento da campo
- 2 Connettore SXP dal sensore

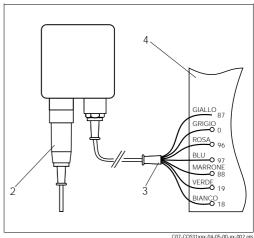


Fig. 16: Scatola di derivazione VS a uno strumento con montaggio a fronte quadro

- 2 Connettore SXP dal sensore
- 3 Cavo di misura (OMK) al trasmettitore
- 4 Vano connessioni del trasmettitore


4.3 Verifiche dopo il collegamento

Stato dello strumento e specifiche	Osservazioni
Il sensore, l'armatura, la scatola di derivazione o il cavo sono danneggiati?	Ispezione visiva
Collegamento elettrico	Osservazioni
La tensione di alimentazione del trasmettitore corrisponde alle specifiche indicate sulla targhetta informativa?	110/230 V c.a. 24 V c.a./c.c.
I cavi installati non sono sotto sforzo o attorcigliati?	
I cavi corrono in canaline completamente isolate?	Cavo alimentazione/cavo corrente debole
L'alimentazione e il cavo del segnale sono correttamente connessi al trasmettitore?	Usare lo schema di connessione del COM 2x3.
I morsetti a vite sono serrati correttamente?	
Tutti gli ingressi dei cavi sono stati installati, serrati e sigillati?	Per i passa cavi laterali: tenere il cavo verso
Tutti gli ingressi dei cavi sono stati installati verso il basso o lateralmente?	il basso per consentire all'acqua di scorrere via.

Oxymax W COS31 Utilizzo

Utilizzo 5


5.1 Struttura del sensore

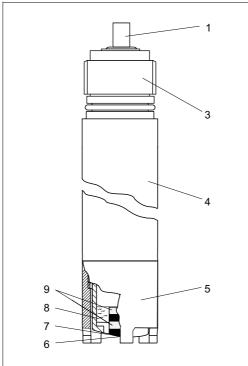

C07-COS371xx-03-05-00-xx-001.eps

Fig. 17: Struttura del sensore

- Cavo del sensore
- Attacco filettato G1 3
- 4 Corpo del sensore
- 5 Protezione della membrana
- Catodo
- Membrana
- Elettrolita
- Anodo

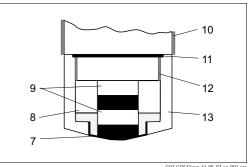

Testa del sensore, schema ritaglio

- 7 Membrana
- 8 Elettrolita
- 9 Anodo
- 10 Attacco filettato per protezione della membrana
- 11 Anello di tenuta
- 12 Attacco filettato per coperchio membrana
- 13 Coperchio membrana

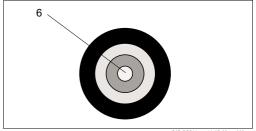


Fig. 19: Testa del sensore, vista dall'alto

Catodo

Il sensore è composto dalle seguenti unità di funzionamento:

- Asta del sensore (fig. 17, pos. 4)
- Testa del sensore con catodo e anodo (fig. 18, fig. 19)
- Coperchio membrana con elettrolita (fig. 18, pos. 13 and 8)
- Protezione della membrana (fig. 17, pos. 5)



- In alternativa alla protezione della membrana, è possibile usare una testa spray COR 3 (opzionale, vedere "Accessori") per il funzionamento senza contatto col fluido e con funzione di pulizia.
- Il tetto a membrana avvitato sulla testa del sensore è riempito con elettrolita. La connessione a vite lo rende impermeabile al fluido.
- La membrana a contatto col fluido è pretensionata in fabbrica.

Utilizzo Oxymax W COS31

5.2 Principio di misura

5.2.1 Polarizzazione

Quando il sensore è connesso al trasmettitore, viene applicata una tensione esterna fissa tra il catodo e l'anodo. La corrente di polarizzazione risultante è indicata sul display del trasmettitore. La corrente, all'inizio, è potente ma diminuisce nel tempo. Il sensore può essere calibrato solo quando il display è stabile.

5.2.2 Membrana

L'ossigeno dissolto nel fluido viene trasportato alla membrana dal flusso in entrata. La membrana è permeabile solo per i gas disciolti. Le altre sostanze dissolte nella fase liquida, ad es. le sostanze ioniche, non penetreranno attraverso la membrana, quindi la conducibilità del fluido non ha impatti sul segnale di misura.

5.2.3 Principio amperometrico

Le molecole di ossigeno diffuse attraverso la membrana sono ridotte a ioni di idrossido (OH-) dal catodo. L'argento si ossida in ioni argento (Ag+) formando uno strato di bromuro d'argento. Il rilascio dell'elettrodo collegato al catodo e accettato dall'anodo crea una corrente. In equilibrio, tale corrente è proporzionale al contenuto di ossigeno del fluido.

Tale corrente viene convertita dallo strumento di misura e indicata sul display come una concentrazione di ossigeno in mg/l, come indice di saturazione in % SAT o come pressione parziale di ossigeno in hPa.

5.3 Calibrazione

La calibrazione è un modo per adattare il trasmettitore ai valori caratteristici del sensore. Poiché non è necessaria alcuna calibrazione di zero del sensore, in presenza di ossigeno viene eseguita una calibrazione a punto singolo.

È necessario calibrare il sensore dopo:

- prima messa in servizio
- sostituzione di una membrana o un elettrolita
- pulizia del catodo
- lunghe interruzioni durante l'operazione senza alimentazione
- intervalli di tempo tipici in base all'esperienza di funzionamento

Esistono tre tipi base di calibrazione:

- in aria (preferibilmente vapore acqueo saturato, ad es. vicino alla superficie dell'acqua)
- in acqua satura d'aria
- immettendo un valore misurato di riferimento nel trasmettitore (il sensore rimane nel fluido).



Nota!

Sarà descritta **solo** la calibrazione in aria, perché rappresenta il modo più semplice di calibrazione ed è quindi consigliata.

La calibrazione in aria è possibile solo se la temperatura dell'aria è ≥ − 5 °C.

Oxymax W COS31 Utilizzo

5.3.1 Calibrazione in aria

- 1. Rimuovere il sensore dal fluido.
- 2. Pulire la superficie del sensore con un panno umido, quindi asciugare la membrana del sensore usando, ad esempio, un panno asciutto.
- 3. Se il sensore viene rimosso da un sistema a pressione chiuso con una pressione di processo superiore alla pressione atmosferica:
 - Aprire il coperchio della membrana per equilibrare la pressione e, se necessario, pulire il coperchio.
 - Sostituire l'elettrolita e chiudere nuovamente il coperchio della membrana.
 - Attendere il termine della polarizzazione.
- 4. Infine, attendere mentre il sensore regola la temperatura dell'aria dell'ambiente. L'operazione richiede circa 20 minuti. Controllare che il sensore non sia esposto alla luce diretta del sole durante l'operazione.
- 5. Se il valore misurato mostrato sul trasmettitore è stabile, eseguire la calibrazione secondo le Istruzioni di funzionamento del trasmettitore.
- 6. Rimettere il sensore dal fluido.



Notal

Si raccomanda di attenersi alle istruzioni di calibrazione del trasmettitore.

5.3.2 Esempio di calcolo del valore di calibrazione

A scopo di verifica, è possibile calcolare il valore di calibrazione previsto (display del trasmettitore) come mostrato nel seguente esempio (la salinità è 0).

- Determinare:
 - la temperatura del sensore (temperatura ambiente)
 - l'altitudine sul livello del mare
 - la pressione dell'aria (=pressione dell'aria rel. al livello del mare) al momento della calibrazione. (Se non è determinabile, usare 1013 hPa per un calcolo approssimativo.)
- 2. Definire:
 - il valore di saturazione S secondo la prima tabella
 - il fattore K secondo la seconda tabella

S [mg/l]
14.64
14.23
13.83
13.45
13.09
12.75
12.42
12.11
11.81
11.53
11.25

°C	S [mg/I]
11	10.99
12	10.75
13	10.51
14	10.28
15	10.06
16	9.85
17	9.64
18	9.45
19	9.26
20	9.08

°C	S [mg/I]
21	8.90
22	8.73
23	8.57
24	8.41
25	8.25
26	8.11
27	7.96
28	7.82
29	7.69
30	7.55

°C	S [mg/I]
31	7.42
32	7.30
33	7.18
34	7.06
35	6.94
36	6.83
37	6.72
38	6.61
39	6.51
40	6.41

Utilizzo Oxymax W COS31

Altitudine [m]	К
0	1.000
50	0.994
100	0.988
150	0.982
200	0.977
250	0.971
300	0.966
350	0.960
400	0.954
450	0.949
500	0.943

Altitudine [m]	К
550	0.938
600	0.932
650	0.927
700	0.922
750	0.916
800	0.911
850	0.905
900	0.900
950	0.895
1000	0.890

Altitudine [m]	К
1050	0.885
1100	0.879
1150	0.874
1200	0.869
1250	0.864
1300	0.859
1350	0.854
1400	0.849
1450	0.844
1500	0.839

Altitudine [m]	К
1550	0.834
1600	0.830
1650	0.825
1700	0.820
1750	0.815
1800	0.810
1850	0.805
1900	0.801
1950	0.796
2000	0.792

3. Determinare:

- L = pressione rel. dell'aria alla calibrazione (1013 hPa se sconosciuta)
- M = 1.02 per calibrazione in aria risp. 1.00 per calibrazione in acqua satura d'aria
- 4. Calcolare il valore di calibrazione C:

$$C = S \cdot K \cdot L \cdot M$$

Esempio

- Calibrazione dell'aria a 18°C, altitudine 500 m s.l.m, pressione dell'aria 1022 hPa
- S = 9.45 mg/I, K = 0.943, L = 1.0089, M = 1.02

Valore di calibrazione C = 9,17 mg/l.

Oxymax W COS31 Messa in servizio

6 Messa in servizio

6.1 Verifica funzionale

Prima della prima messa in servizio, controllare se:

- il sensore è installato correttamente
- il collegamento elettrico è corretto.

Se si utilizza un'armatura con pulizia automatica, controllare che il collegamento dell'acqua presso il collegamento di pulizia dell'armatura sia corretto.



Αννίςο

Pericolo di fuoriuscita del fluido

Prima di applicare aria compressa a un'armatura con dispositivo di pulizia, verificare che i collegamenti siano installati correttamente. In caso contrario, l'armatura non può essere inserita nel processo.

6.2 Polarizzazione

Il sensore è stato collaudato in fabbrica verificandone il perfetto funzionamento ed è fornito pronto per l'utilizzo.

Per preparare la calibrazione, procedere come segue:

- 1. Rimuovere il coperchio protettivo del sensore.
- Posizionare il sensore asciutto all'aria aperta. L'aria sarà saturata di vapore acqueo. Quindi, installare il sensore il più vicino possibile all'acqua. Durante la calibrazione della membrana del sensore, verificare che la membrana rimanga asciutta. Evitare quindi qualsiasi contatto con la superficie dell'acqua.
- 3. Collegare il sensore al trasmettitore e accendere il trasmettitore.
- Accendere il trasmettitore
 Se si connette il sensore al trasmettitore Liquisys M COM223/253, la polarizzazione viene automaticamente svolta dopo aver acceso il trasmettitore.
- 5. La procedura di polarizzazione richiede un'ora circa.



Nota

La polarizzazione è forte all'inizio, quindi diminuisce. Quando la polarizzazione termina, il valore a display si stabilizza e rimane praticamente costante.



Attenzione!

- Quando si rimuove il sensore dal fluido, proteggerlo dalla luce solare diretta.
- Si raccomanda di attenersi alle istruzioni di calibrazione e messa in servizio del trasmettitore.

6.3 Calibrazione

Calibrare il sensore (Calibrazione in aria, \rightarrow Pagina 17) immediatamente dopo la polarizzazione.

Gli intervalli di calibrazione dipendono in gran parte da:

- L'applicazione e
- La posizione di installazione del sensore.

I seguenti metodi consentono di determinare la durata degli intervalli di calibrazione:

- Controllare il sensore dopo un mese di utilizzo estraendolo dal fluido, asciugandolo e quindi misurano l'indice di saturazione dell'ossigeno in aria dopo 10 minuti.
 Decidere utilizzando i risultati:
 - a. Se il valore misurato non è a 102 ±2 %SAT, è necessario calibrare il sensore.
 - b. Altrimenti, raddoppiare il periodo di tempo prima del prossimo controllo.
- Procedere secondo il Punto 1 dopo due, quattro e/o otto mesi. In questo modo, è possibile determinare l'intervallo di calibrazione ideale del sensore.



Nota!

Assicurarsi di calibrare il sensore almeno una volta l'anno.

Manutenzione Oxymax W COS31

7 Manutenzione

Il lavoro di manutenzione deve essere effettuato a intervalli regolari. Per garantire che sia eseguito, si consiglia di immettere in anticipo le date di manutenzione previste in un registro o in un calendario.

Devono essere effettuate le seguenti attività:

- Pulizia del sensore (specialmente quando la membrana è sporca)
- Controllare la funzione di misura:
 - 1. Rimuovere il sensore dal fluido.
 - 2. Pulire e asciugare la membrana.
 - 3. Dopo circa 10 minuti, misurare l'indice di saturazione dell'aria (senza ricalibrazione).
 - 4. Il valore misurato deve essere vicino a 102% SAT (display della saturazione di O₂ con COM 2x3 premendo 4 volte il tasto ±).
- Sostituire una membrana difettosa o una membrana che non è più possibile pulire.
- · Ricalibrazione.



Nota!

Per la pulizia periodica e automatica del sensore, si consiglia di installare sul punto di misura un sistema di pulizia completamente automatizzato, ad es. Chemoclean (vedere Accessori)

7.1 Pulizia del sensore

La misura può essere compromessa da un guasto o un malfunzionamento del sensore, ad es.:

- Rivestimenti sulla membrana del sensore
 - ridotta.
- Sporcizia o avvelenamento dell'elettrolita
 - causa tempi di risposta più lunghi e misure erronee.

Per garantire una misura affidabile, il sensore deve essere pulito a intervalli regolari. La frequenza e l'intensità dell'operazione di pulizia dipende dal fluido di misura.

Pulire il sensore:

- prima di ogni taratura
- a intervalli regolari durante il funzionamento, quando necessario
- prima di restituirlo per la riparazione.

In base al tipo di inquinamento, procedere come segue:

Tipo di inquinamento	Pulizia
Depositi di sale	Immergere il sensore nell'acqua potabile o in acido idrocloridrico 1-5% per alcuni minuti. In seguito, risciacquare abbondantemente con acqua.
Particelle di sporco sul corpo del sensore (non sulla membrana!)	Pulire il corpo del sensore meccanicamente con acqua e una spazzola adatta.
Particelle di sporco sul coperchio della membrana o sulla membrana	Pulire la membrana con acqua e una spugna morbida.



Attenzione!

Dopo la pulizia, risciacquare abbondantemente il sensore con acqua.

Oxymax W COS31 Manutenzione

7.2 Rigenerazione del sensore

Parti del sensore soffriranno di usura durante il funzionamento. Un intervento adatto può ripristinare la normale funzionalità. Gli interventi comprendono:

Intervento	Causa
Pulizia del catodo	catodo sporco o rivestito
Sostituzione dell'anello di tenuta	danni evidenti all'anello di tenuta
Sostituzione dell'elettrolita	segnale di misura instabile o non plausibile o elettrolita sporco
Sostituzione del coperchio della membrana	membrana non pulibile, membrana danneggiata (forata o deformata)



Avviso!

Prima di iniziare la rigenerazione, spegnere l'alimentatore del trasmettitore.

7.2.1 Pulizia del catodo

Il catodo deve semplicemente essere pulito quando è visibilmente sporco o è ricoperto da uno strato di argento.

Per pulirlo, procedere come segue:

- 1. Svitare il coperchio della membrana dal corpo della membrana.
- 2. Pulire attentamente la superficie in due operazioni con il foglio abrasivo (compreso nella fornitura) finché la patina (di argento) non è stata completamente rimossa. Usare prima il foglio verde, quindi quello giallo.
- 3. Pulire l'elettrodo con acqua potabile o distillata.
- 4. Riempire il coperchio della membrana con elettrolita fresco COY 3-F e riavvitarlo a fondo sul corpo della membrana.



Attenzione!

L'anodo è rivestito in fabbrica da uno strato di bromuro d'argento. Non pulire l'anodo in nessuna altra circostanza!

Se in seguito all'operazione il rivestimento dell'anodo viene rimosso, il sensore diventa inutilizzabile e deve essere restituito al fine di applicarvi un nuovo rivestimento. In questo caso, contattare l'ufficio vendite più vicino.

7.2.2 Sostituzione dell'anello di tenuta (O-ring)

La sostituzione dell'anello di tenuta è necessaria solo quando questo è visibilmente danneggiato. Per la sostituzione, utilizzare unicamente gli anelli di tenuta forniti COY 31-OR.

7.2.3 Sostituzione dell'elettrolita

L'elettrolita COY 3-F subisce una lenta usura durante le operazioni di misura a causa delle reazioni di resistenza elettrochimica. Quando è diseccitato, non si verifica alcuna reazione e non avviene alcuna usura.

La vita teorica dell'elettrolita utilizzato in acqua potabile satura d'aria a 20° è di massimo 5 anni. La vita dell'elettrolita viene abbreviata dalla presenza di gas diffusi, dissolti come ad es. H^2S , NH_3 o da alte concentrazioni di CO_2 .

Si verificano carichi particolari con:

- fasi anaerobiche (ad es. denitrificazione)
- acque industriali fortemente inquinate, specialmente ad alte temperature.

Manutenzione Oxymax W COS31



Avviso!

Pericolo di ustioni da acido!

L'elettrolita è altamente alcalino. È necessario seguire le normative di sicurezza appropriate. Indossare sempre quanti e occhiali di protezione quando si utilizzano elettroliti.

Per sostituire l'elettrolita, procedere come segue:

- 1. Rimuovere il coperchio della membrana.
- 2. Sostituire l'elettrolita e, se necessario, il coperchio della membrana.
- 3. Riposizionare il coperchio della membrana sul corpo della membrana e avvitare il coperchio a fondo.

7.2.4 Sostituzione del coperchio della membrana

Rimozione del vecchio coperchio della membrana.

- 1. Rimuovere il sensore dal fluido.
- 2. Svitare la protezione della membrana.
- 3. Pulire la superficie del sensore.
- 4. Svitare il coperchio della membrana.
- 5. Se necessario, pulire il catodo o sostituire l'anello di tenuta se danneggiato.
- 6. Sciacquare il sostegno dell'elettrodo con acqua potabile.

Installazione del nuovo coperchio della membrana

- 7. Verificare che non ci siano particelle di sporco sulla superficie della guarnizione.
- 8. Versare l'intero contenuto del flacone di plastica (contenente elettrolita COY3-F) nel coperchio della membrana.
- 9. Rimuovere le bolle d'aria nell'elettrolita dando dei colpetti al lato del coperchio della membrana (ad es. con una matita).
- 10. Tenere il corpo del sensore **in posizione d'angolo** e avvitare con cautela il coperchio della membrana **fino al fondo.**
- 11. Riavvitare la protezione della membrana.



Nota!

Una volta sostituito il coperchio della membrana, polarizzare e ricalibrare il sensore. Quindi, inserire il sensore nel fluido e controllare che sul trasmettitore non sia acceso alcun allarme.

Oxymax W COS31 Accessori

8 Accessori

8.1 Accessori per le connessioni

□ Scatola di derivazione VS con ingresso a innesto e presa a 7 poli, per estensioni del cavo dal sensore (COS 31, COS 3 con connettore SXP) al trasmettitore, IP 65; numero d'ordine 50001054 □ Cavo di misura OMK per utilizzo come cavo di estensione tra la scatola di giunzione VS e il trasmettitore, non terminato venduto al metro - codice d'ordine 50004124 ☐ Cavo di misura per sensori COS 31 e COS 71 con connettore TOP 68 COK 31; lunghezza: 1,5 m - codice d'ordine 51506820 COK 31; lunghezza: 7 m - codice d'ordine 51506821 COK 31; lunghezza: 15 m - codice d'ordine 51506822 8.2 Accessori per l'installazione ☐ Armatura di immersione COA110 per l'immersione del sensore in vasca, tubo PVC risp. PUR corpo galleggiante con tubo immersione SS 1.4571 (AISI 316Ti); Ordinazione in base al codice d'ordine, vedere le Informazioni tecniche (TI035C/07/en50052566) □ Cella a deflusso COA250 per installazione del sensore in tubi, PVC; (Informazioni tecniche TI111C/07/en, codice d'ordine. 50068518) numero d'ordine COA 250-A □ Armatura retrattile Cleanfit COA451 Armatura retrattile a controllo manuale, acciaio inox, con valvola a sfera; per sensori di ossigeno Ordinazione in base al codice d'ordine, (Informazioni tecniche TI368C/07/en51512831) □ Armatura di immersione Dipfit W CYA611 per l'immersione del sensore in vasche, canali a pelo libero e serbatoi, PVC; Ordinazione in base al codice d'ordine, (Informazioni tecniche TI 166C/07/en) ☐ Armatura di immersione CYY105 per l'immersione del sensore in vasche, SS 1.4404 (AISI 316L) tubo, SS 1.4571 (AISI 316Ti) elemento: Ordinazione in base al codice d'ordine (Informazioni tecniche TI 092C/07/en50061228) □ Supporto per il bordo della vasca CYY106 per l'immersione del sensore nella vasca, SS 1.4301 (AISI 304); numero d'ordine CYY106-A □ Deflettore OP protezione aggiuntiva per condizioni climatiche estreme; codice d'ordine 50028712 ☐ Protezione della membrana COY3-SK o l'uso del sensore in allevamenti ittici; codice d'ordine 50081787 Misura, controllo e pulizia del sensore Trasmettitore con monitoraggio delle funzioni del sensore integrato, monitoraggio del valore

8.3

□ Liquisys M COM223/253

misurato, contatto di allarme a configurazione libera, installazione in campo o con pannello di controllo, HART® o PROFIBUS possibile;

Ordinazione in base al codice d'ordine, vedere le Informazioni tecniche TI 199C/07/en Codice d'ordine 51500281

□ ChemoClean

Iniettore CYR10 e sequenziatore di programmi CYR20

Ordinazione in base al codice d'ordine, vedere le Informazioni tecniche (TI 046C/07/en)

☐ Testa spray COR3

per la pulizia del sensore nel funzionamento in immersione; Codice d'ordine: COR3-0

Risoluzione dei problemi Oxymax W COS31

9 Risoluzione dei problemi

9.1 Istruzioni per la risoluzione dei problemi

Se si verifica uno dei seguenti problemi, controllare il misuratore come indicato.

Problema	Controllare	Rimedi
	Il trasmettitore è in tensione	Collegare l'alimentazione.
Nessun display, nessuna reazione da parte del	Il sensore è collegato correttamente?	Effettuare una connessione corretta.
	È presente il flusso di fluido?	Creare il flusso.
sensore	Rivestimenti sulla membrana?	Pulire il sensore.
	Elettrolita nella camera di misura?	Riempire con elettrolita o sostituire l'elettrolita.
	Con una connessione TOP 68: umidità o sporco nel connettore?	Pulizia della testa a innesto TOP 68 usando alcol detergente.
	Polarizzazione completa?	Attendere fino al termine del tempo di polarizzazione.
	Ultima calibrazione con sensore diverso?	Ricalibra
	Il display della temperatura è chiaramente troppo basso?	Controllare il sensore, se necessario inviare il sensore in riparazione.
Il valore visualizzato è troppo alto	Membrana visibilmente deformata?	Sostituire il coperchio della membrana.
	Elettrolita sporco?	Sostituire l'elettrolita.
	Sensore aperto. Display trasmettitore elettrodi asciutti ora a 0?	Verificare la connessione elettrica. Se il problema persiste, inviare il sensore per riparazioni.
	Rivestimento dell'anodo consumato, l'anodo è argento invece che marrone?	Inviare il sensore per il ripristino del rivestimento.
	Il catodo è rivestito d'argento?	Pulire il catodo.
	Con una connessione TOP 68: umidità o sporco nel connettore?	Pulizia della testa a innesto TOP 68 usando alcol detergente.
	Sensore calibrato?	Ricalibra
Il valoro visualizzato ò	È presente il flusso di fluido?	Creare il flusso.
Il valore visualizzato è troppo basso	Temperatura visualizzata decisamente troppo alta?	Controllare il sensore, se necessario inviare il sensore in riparazione.
	Rivestimenti sulla membrana?	Pulire la membrana o sostituire il coperchio della membrana.
	Elettrolita sporco?	Sostituire l'elettrolita.
	Membrana visibilmente deformata?	Sostituire il coperchio della membrana.
Forti deviazioni nel valore visualizzato	Sensore aperto. Display trasmettitore elettrodi asciutti ora a 0?	Verificare la connessione elettrica. Se il problema persiste, inviare il sensore per riparazioni.
	Interferenza EMC sul misuratore?	Rimuovere la schermatura esterna del sensore e il cavo di estensione al morsetto S. Tagliare le linee di misura e segnalazione dalle linee elettriche ad alta tensione.

Oxymax W COS31 Risoluzione dei problemi

Problema	Controllare	Rimedi
	Membrana non più sigillata a causa del danno?	Sostituire il coperchio della membrana, polarizzare e calibrare il sensore.
Allarme di rottura della membrana	Membrana esterna non danneggiata?	Avvitare il coperchio della membrana a fondo. Se l'allarme persiste: separare il sensore dal trasmettitore per almeno 30 sec. Ripetere un paio di volte, se l'allarme rimane. Se l'allarme persiste: sostituire il coperchio della membrana, polarizzare e ricalibrare.
	Anello di tenuta del coperchio della membrana non pulito?	Estrarre il sensore dal fluido, pulirlo ed asciugarlo. Pulire l'anello di tenuta o sostituirlo, se necessario. Separare il sensore dal trasmettitore per almeno 30 sec. Ripetere un paio di volte, se l'allarme persiste. Se l'allarme persiste: inviare il sensore per riparazioni.



Nota!

Si raccomanda di attenersi alle istruzioni per la risoluzione dei problemi del trasmettitore. Se necessario, effettuare un test del trasmettitore.

9.2 Controlli del sensore



Attenzione!

Solo personale autorizzato ed esperto può effettuare test sul sensore! Sarà inoltre necessario un multimetro (tensione, resistenza).

Controllare	Misura	Setpoint
Ispezione della tensione	Con il sensore connesso, verificare la tensione di funzionamento sul trasmettitore Liquisys M COM 223/253-WX/WS	tra i morsetti 87 e 0: +8 V tra i morsetti 88 e 0: 8 V
Controllo della pendenza	Controllo della pendenza Posizionare il sensore in aria e asciugarlo con un panno di carta.	
	Immergere il sensore in soluzione zero ¹ .	Display vicino a 0 mg/l (0% Sat)
Controllo del punto zero	Aprire la camera di misura e asciugare gli elettrodi.	
Controllo del sensore di temperatura	Scollegare il sensore e misurare la resistenza: – tra i pin TOP68 3 e 4 – tra i pin SXP 3 4 (con versione cavo fisso)	in base alla temperatura: $5 ^{\circ}\text{C}$: $74.4 \text{K}\Omega$ $10 ^{\circ}\text{C}$: $58.7 \text{K}\Omega$ $15 ^{\circ}\text{C}$: $46.7 \text{K}\Omega$ $20 ^{\circ}\text{C}$: $37.3 \text{K}\Omega$ $25 ^{\circ}\text{C}$: $30.0 \text{K}\Omega$ $30 ^{\circ}\text{C}$: $24.3 \text{K}\Omega$

- ¹ Come usare una soluzione zero:
- 1. Riempire un grosso bicchiere (1,5 2 l) con circa 1 litro d'acqua.
- 2. Versare l'intero contenuto di soluzione zero del coperchio nell'acqua.
- Immergere il sensore in acqua e attendere un periodo di tempo sufficiente (15 min. per l'esaurimento dell'ossigeno).
 Il display scende a circa 0 mg/l (0 %SAT).

In base alle condizioni (superficie di contatto acqua/aria) la soluzione di zero è stabile per circa 12 ore.

Risoluzione dei problemi Oxymax W COS31



Nota!

In caso di discrepanze con i valori di riferimento, seguire le istruzioni di risoluzione dei problemi o contattare gli uffici vendita.

9.3 Parti di ricambio

	Pos.	Parti di ricambio kit	numero d'ordine
	1	Sensore	vedere la Struttura dei pacchetti di prodotti
	2	Anello di tenuta COY31-OR – Materiale Viton – 3 pezzi	51506985
		Coperchio membrana - Cartuccia sostitutiva COY31-WP per tempo di risposta normale - 2 sostituzione preterminata con membrana pretensionata	51506976
2	3	Coperchio membrana Cartuccia sostitutiva COY31S-WP per tempo di risposta rapidi 2 cartucce sostitutive preterminate con membrana pretensionata	51506977
	4	Protezione della membrana	su richiesta
	senza fig.	Elettrolita COY3-F – 10 flaconi di plastica, trasparenti	50053349
Fig. 20: COS31		Fogli abrasivi COY3-PF – per pulizia del catodo – 10 pezzi	51506973
		Soluzione zero – 3 unità per produrre 3 x 1 litri di soluzione priva di ossigeno	50001041
	2.4	Kit accessori COY31-Z, uno cad.: - Elettrolita COY3F - Cartuccia sostitutiva COY31-WP per tempi di risposta normali - Anello di tenuta COY31-OR - Foglio abrasivo COY3-PF	51506784
	2-4	Kit accessori COY31-S-Z, uno cad.: - Elettrolita COY3F - Cartuccia sostitutiva COY31S-WP per tempi di risposta rapidi - Anello di tenuta COY31-OR - Foglio abrasivo COY3-PF	51506785

9.4 Spedizione in fabbrica

Se lo strumento deve essere riparato, inviarlo pulito all'ufficio vendite Endress+Hauser di competenza. Se possibile, utilizzare l'imballaggio originale.

Accludere una copia della "Dichiarazione di decontaminazione" compilata (fotocopiare la penultima pagina di queste Istruzioni di funzionamento), unitamente alle bolle di accompagnamento per la spedizione.

Senza la "Dichiarazione di decontaminazione" non sarà possibile effettuare alcuna riparazione"!

9.5 Smaltimento

Lo strumento contiene componenti elettronici, pertanto lo smaltimento deve essere effettuato in conformità con le norme in vigore in materia di smaltimento dei rifiuti elettronici.

Osservare le norme locali in materia.

Oxymax W COS31 Dati tecnici

10 Dati tecnici

10.1 Ingresso

Valore misurato	ossigeno dissolto [mg/I / % SAT / hPa]
Campo di misura	con Liquisys M COM223/253-WX/WS: 0,05 60,00 mg/I 0.00 600 % SAT 0 1200 hPa

10.2 Caratteristiche prestazionali

Tempo di risposta	COS31-XXX1 (coperchio membrana per tempi di risposta normali): T ₉₀ : 3 minuti T ₉₉ : 9 minuti (ciascuno a 20 °C) COS31-XXX2 (coperchio membrana per tempi di risposta rapidi): T ₉₀ : 0,5 minuti T ₉₉ : 1,5 minuti (ciascuno a 20 °C)	
Pendenza	c.a. 300 nA (a 20 °C, 1013 hPa)	
Tempo di polarizzazione	< 60 minuti	
Portata minima	per il 95 % del display del valore misurato: • COS31-XXX1: tipico 0,5 cm/s • COS31-XXX2: tipico 2,5 cm/s	
Deriva	con polarizzazione permanente: < 1 % per mese	
Corrente zero	corrente zero libera	
Monitoraggio del sensore	con Liquisys M COM 223/253: interruzione del cavo o cortocircuito misura scorretta e passivazione del sensore	

10.3 Condizioni ambientali

Temperatura di immagazzinamento	riempito con elettrolita: –5 50 °C senza elettrolita: –20 60 °C
Grado di protezione	IP 68

10.4 Processo

Pressione di processo	max. 10 bar (145 psi) di sovrapressione consentibile. Il funzionamento in sottopressione non è possibile.
Temperatura di processo	−5 50 °C

Dati tecnici Oxymax W COS31

10.5 Struttura meccanica

Modello / dimensioni	vedere capitolo "Installazione"	
Pesi	con lunghezza del cavo 7 m: 0,7 kg con lunghezza del cavo 15 m: 1,1 kg con connessione a innesto TOP68: 0,3 kg	
Materiali	Asta del sensore acciaio inox 1.4571, AISI 316Ti Coperchio membrana POM Catodo: Oro Anodo: Argento / bromuro d'argento	
Connessioni al processo	G1	
Passa cavo (sensore)	Cavo fisso o connessione a innesto TOP68	
Passa cavo (trasmettitore)	Connettore SXP (strumento da campo) Connessione morsetto (strumento con montaggio a pannello)	
Lunghezza del cavo compreso cavo di estensione	max. 100 m (compresa estensione cavo)	
Compensazione di temperatura	Sensore di temperatura NTC 30 kΩ a 25 °C, 0 50 °C	
Spessore della membrana	 COS31-XXX1: c.a. 50 μm COS31-XXX2: c.a. 25 μm 	

Indice analitico

A	
Accessori	
Deflettore	23
Misura, controllo e pulizia del sensore	
Per la connessione	
Per la pulizia	
Protezione della membrana	
Accettazione	
Ambiente	
Anello di tenuta	
Angolo di installazione	
Armatura a catena	
Armatura di flusso	
Armatura di immersione	
armatura retrattile	
aimatura retrattile12,	23
C	
Calibrazione	10
Calcolo del valore di calibrazione	
In aria	17
Calibrazione	1,
Generale	
Caratteristiche prestazionali	
Catena di misura	8
Collegamento elettrico	
Connessione diretta	
Mediante scatola di derivazione	
Connessione via cavo	
Corpo galleggiante	11
Corrente zero	27
D.	
D	
Dati tecnici	
Ambiente	
Caratteristiche prestazionali	
Ingresso	27
Processo	27
Cttt	വ
Struttura meccanica	28
Deflettore	
	23
Deflettore	23 27
Deflettore	23 27
Deflettore	23 27 7
Deflettore	23 27 7
Deflettore	23 27 7
Deflettore	23 27 7 24
Deflettore Deriva. Dimensioni E Errori F funzionamento	23 27 7 24
Deflettore Deriva. Dimensioni E Errori F funzionamento Funzionamento in immersione	23 27 7 24 4 9
Deflettore Deriva. Dimensioni E Errori F funzionamento	23 27 7 24 4 9
Deflettore Deriva. Dimensioni E Errori F funzionamento Funzionamento in immersione	23 27 7 24 4 9
Deflettore Deriva. Dimensioni E Errori F funzionamento Funzionamento in immersione Funzionamento portata	23 27 7 24 4 9
Deflettore Deriva. Dimensioni E Errori F funzionamento Funzionamento in immersione Funzionamento portata I Icone	23 27 7 24 4 9
Deflettore Deriva. Dimensioni E Errori F funzionamento Funzionamento in immersione Funzionamento portata I Icone Icone e simboli per la segnalazione di note legate	23 27 7 24 4 9 11
Deflettore Deriva. Dimensioni E Errori F funzionamento Funzionamento in immersione Funzionamento portata I Icone Icone e simboli per la segnalazione di note legate alla sicurezza.	23 27 7 24 4 9 11
Deflettore Deriva. Dimensioni E Errori F funzionamento Funzionamento in immersione Funzionamento portata I Icone Icone e simboli per la segnalazione di note legate	23 27 7 24 4 9 11

Installazione Angolo di armatura retrattile Controllare. Esempi Funzionamento in immersione Funzionamento portata Luogo Punto di misura		. 7 12 12 . 9 . 9 11 . 8
Lunghezza del cavo		28
Manutenzione	 . 4,	16 19
O Oggetto della fornitura		. 6
Palina verticale Parti di ricambio Peso Polarizzazione Principio amperometrico Principio di misura Processo Protezione della membrana Pulizia Catodo in oro	 16, 	26 28 19 16 16 27 23
Sensore		20
Rigenerazione		21
S Sensore Controlli Dimensioni Rigenerazione Struttura	 	. 7 21 15
Sicurezza operativa	 	. 5 26
Anello di tenuta	 . 4,	22 21 26 . 6

T Temperatura di immagazzinamento 27 Trasporto 6 U Uso 4 Uso previsto 4 V Verifica Connessioni 14 Funzione 19 Installazione 12

Dichiarazione di decontaminazione

Caro cliente, A causa dei requisiti legali e per la sicurezza dei nostri dipendenti e dei nostri strumenti, prima dell'evasione dell'ordine è necessario ricevere la presente "Dichiarazione di decontaminazione" firmata. Includere sempre allo strumento la dichiarazione compilata in tutte le sue parti e i documenti di spedizione. Aggiungere anche le schede di sicurezza e/o le istruzioni di trasporto specifiche, se necessario. Tipo di strumento / sensore: Nr. di serie: Fluido / concentrazione: Temperatura: Pressione: Pulito con: Conducibilità: Viscosità: Avvisi per il fluido utilizzato (contrassegnare gli avvisi appropriati) radioattivo dannoso per la pericolo infiammabile esplosivo caustico velenoso sicuro salute biologico Ragione della restituzione Dati della società Società: Persona di contatto: Ufficio: Indirizzo: Telefono: Fax / e-mail: Codice d'ordine: Si garantisce che gli strumenti restituiti sono stati puliti e decontaminati secondo i principi di buona cura e in conformità con tutte le norme in vigore. Questo strumento è stato decontaminato e non presenta alcun rischio per la salute o la sicurezza.



(Luogo, data)

(Timbro della società e firma legalmente vincolante)

www.endress.com/worldwide

